

# CHIROPRO 3<sup>rd</sup> Gen

ESP INSTRUCCIONES DE USO.



## Conjunto CHIROPRO 3RD GEN REF 1700708-001




REF 1600995-001



REF 1303393-001



REF 1601008-001

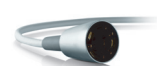

REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1500984-005



REF 1307727-010



REF 1301575-001



REF 1502329-002

## Conjunto CHIROPRO 3RD GEN 20:1 L REF 1700707-001



SET REF 1700708-001



REF 1600692-001

## Conjunto CHIROPRO 3GEN KM REF 1700737-001




REF 1600995-001



REF 1303393-001



REF 1601008-001

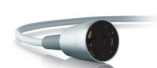

REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1501635-010



REF 1307727-010



REF 1301575-001



REF 1502329-002

## Conjunto CHIROPRO 3GEN CA 20:1 L KM REF 1700736-001



SET REF 1700737-001



REF 1600786-001

## Opciones



REF 1601008-001



REF 1600692-001



REF 1600598-001



REF 1600785-001




REF 1600786-001



REF 1600052-001



REF 1303393-001

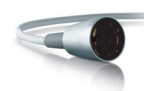

REF 1601009-001



REF 1600631-001



REF 1301575-001



REF 1502329-002



REF 1307727-010



REF 1307312-010



REF 1500984-010



REF 1501738-010



REF 1501635-010



REF 1501621-010



REF 1307031-001

# Índice

|           |                                                                         |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>Símbolos .....</b>                                                   | <b>80</b>  |
| 1.1       | Descripción de los símbolos de los equipos Chiropro 3rd Gen ..          | 80         |
| 1.2       | Descripción de los símbolos de los accesorios de Chiropro 3rd Gen ..... | 80         |
| <b>2</b>  | <b>Identificación, uso previsto y notación .....</b>                    | <b>81</b>  |
| 2.1       | Identificación .....                                                    | 81         |
| 2.2       | Uso previsto .....                                                      | 81         |
| 2.3       | Población de pacientes prevista .....                                   | 81         |
| 2.4       | Usuario previsto .....                                                  | 81         |
| 2.5       | Afecciones médicas previstas .....                                      | 81         |
| 2.6       | Contraindicaciones y advertencias para el paciente .....                | 81         |
| 2.7       | En caso de accidentes .....                                             | 81         |
| 2.8       | Notación y enlaces a los capítulos .....                                | 81         |
| <b>3</b>  | <b>Advertencias y precauciones de uso .....</b>                         | <b>82</b>  |
| 3.1       | Información general .....                                               | 82         |
| 3.2       | Advertencias .....                                                      | 82         |
| <b>4</b>  | <b>Descripción .....</b>                                                | <b>83</b>  |
| 4.1       | Visión general del sistema Chiropro 3rd Gen .....                       | 83         |
| 4.2       | Conjuntos suministrados .....                                           | 84         |
| 4.3       | Opciones .....                                                          | 84         |
| 4.4       | Datos técnicos .....                                                    | 84         |
| 4.5       | Prestaciones .....                                                      | 85         |
| 4.6       | Protección del medioambiente e indicaciones para el desecho .....       | 85         |
| 4.7       | Compatibilidad electromagnética (descripción técnica) .....             | 86         |
| 4.7.1     | Precauciones de uso .....                                               | 86         |
| 4.7.2     | Advertencias de compatibilidad electromagnética ..                      | 86         |
| 4.7.3     | Compatibilidad electromagnética: emisiones e inmunidad .....            | 86         |
| <b>5</b>  | <b>Instalación .....</b>                                                | <b>88</b>  |
| 5.1       | Instalación del sistema Chiropro 3rd Gen .....                          | 89         |
| 5.2       | Procedimiento de encendido/apagado .....                                | 89         |
| <b>6</b>  | <b>Visión general de la interfaz .....</b>                              | <b>90</b>  |
| 6.1       | Modos Chiropro 3rd Gen .....                                            | 90         |
| 6.2       | Vista general de las funciones de la rueda de rotación .....            | 90         |
| 6.3       | Alarmas acústicas .....                                                 | 91         |
| <b>7</b>  | <b>Operación .....</b>                                                  | <b>92</b>  |
| 7.1       | Descripción de la Pantalla operación .....                              | 92         |
| 7.2       | Realizar una operación, pasos P1 y P2 .....                             | 92         |
| 7.3       | Realizar una operación, pasos P3, P4 y P5 .....                         | 93         |
| <b>8</b>  | <b>Ajustes .....</b>                                                    | <b>94</b>  |
| 8.1       | Velocidad de giro del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen .....     | 94         |
| 8.2       | Par del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen .....                   | 94         |
| 8.3       | Sentido de giro del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen .....       | 94         |
| 8.4       | Nivel de irrigación .....                                               | 95         |
| 8.5       | Contra-ángulo .....                                                     | 95         |
| <b>9</b>  | <b>Modos especiales .....</b>                                           | <b>96</b>  |
| <b>10</b> | <b>Lista de errores y resolución de problemas .....</b>                 | <b>98</b>  |
| 10.1      | Advertencia de seguridad (en funcionamiento) .....                      | 98         |
| 10.2      | Error de funcionamiento del aparato .....                               | 99         |
| <b>11</b> | <b>Mantenimiento .....</b>                                              | <b>100</b> |
| 11.1      | Revisión .....                                                          | 100        |
| 11.2      | Limpieza y desinfección .....                                           | 100        |
| 11.3      | Importante .....                                                        | 101        |
| 11.4      | Sustitución de fusibles .....                                           | 101        |
| <b>12</b> | <b>Términos de la garantía .....</b>                                    | <b>102</b> |

# 1 Símbolos

## 1.1 Descripción de los símbolos de los equipos Chiropro 3rd Gen

| Símbolo                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                        | Símbolo                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Marcado de conformidad CE con el número del organismo notificado.                                                                                                                  |    | Símbolo universal para reutilización/reciclaje.                                                                                                                                                                  |
|    | APAGADO (corriente).                                                                                                                                                               |    | Recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos.                                                                                                                                                      |
|    | ENCENDIDO (corriente).                                                                                                                                                             |    | Fabricante.                                                                                                                                                                                                      |
|    | Fusible.                                                                                                                                                                           |    | Lámpara: luz, iluminación.                                                                                                                                                                                       |
|    | Corriente alterna.                                                                                                                                                                 |    | Alarmas acústicas.                                                                                                                                                                                               |
|    | Radiación electromagnética no ionizante.                                                                                                                                           | Rx Only                                                                             | Advertencia: las leyes estadounidenses solo permiten la compra de este dispositivo a los profesionales del sector sanitario con titulación y licencia para ejercer o a otras personas designadas por los mismos. |
|    | ATENCIÓN: peligro que podría dar lugar a lesiones o daños leves o moderados en el dispositivo si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.                        |    | ADVERTENCIA: peligro que podría dar lugar a lesiones o daños graves en el dispositivo si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.                                                              |
|   | Consulte el manual/folleto de instrucciones ( <a href="https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/">https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/</a> ). |   | Marca CSA. Cumple los estándares de EE. UU. y Canadá.                                                                                                                                                            |
|  | Número de catálogo.                                                                                                                                                                |  | Número de serie.                                                                                                                                                                                                 |
|  | Representante autorizado de la Unión Europea.                                                                                                                                      |  | Producto sanitario.                                                                                                                                                                                              |
|  | Código de matriz de datos con información del producto. Incluye identificación única del producto.                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |

## 1.2 Descripción de los símbolos de los accesorios de Chiropro 3rd Gen

| Símbolo                                                                             | Descripción                                                       | Símbolo                                                                             | Descripción                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Marcado de conformidad CE con el número del organismo notificado. |  | Lavadora de desinfección térmica.                             |
|  | Fecha de caducidad.                                               |  | Símbolo universal para reutilización/reciclaje.               |
|  | No reutilizar.                                                    |  | Recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos.   |
|  | Esterilizado con óxido de etileno.                                |  | Esterilizable en autoclave hasta la temperatura especificada. |
|  | Seguridad eléctrica. Parte aplicada tipo B.                       |  | Fabricante.                                                   |
|  | Número de catálogo.                                               |  | Número de serie.                                              |
|  | No contiene DEHP.                                                 |  | Código de lote.                                               |
|  | No usar si el embalaje está dañado.                               |                                                                                     |                                                               |

# 2 Identificación, uso previsto y notación

## 2.1 Identificación

El dispositivo Chiropro 3rd Gen consta de un sistema de mesa para implantología dental y permite controlar un micromotor dental que acciona una pieza de mano odontológica. Una bomba peristáltica encauza el líquido fisiológico a través de una línea de irrigación estéril de un solo uso. La consola consta de una única rueda de control para establecer los parámetros y de un control de pie para activar y desactivar la bomba, desplazarse entre las diferentes etapas del procedimiento seleccionado y controlar la dirección de giro del motor. La pantalla LCD del aparato muestra muchos parámetros de funcionamiento, como la relación de transmisión de la pieza de mano, la velocidad del instrumento, el valor del par y el ajuste del caudal de irrigación.

## 2.2 Uso previsto

Todos los dispositivos Chiropro 3rd Gen están diseñados para su uso en implantología dental.

Las consolas están diseñadas para utilizar un micromotor dental concreto que acciona una pieza de mano odontológica con instrumentos apropiados para cortar tejidos blandos y duros en la boca y atornillar implantes dentales.

El entorno electromagnético previsto (según la norma CEI 60601-1-2 ed. 4.0) es el de las Instalaciones sanitarias profesionales.

## 2.3 Población de pacientes prevista

La población de pacientes prevista para las consolas Chiropro 3rd Gen incluye cualquier persona que acuda al odontólogo para recibir un tratamiento acorde a la afección médica prevista. No existe restricción por edad, raza o cultura. El usuario previsto es responsable de seleccionar el dispositivo adecuado para el paciente según la aplicación clínica específica.

## 2.4 Usuario previsto

El Chiropro 3rd Gen está diseñado para que lo utilicen únicamente dentistas y cirujanos en clínicas dentales y hospitales.

## 2.5 Afecciones médicas previstas

La implantología dental es un procedimiento electivo para recolocar uno o varios dientes que faltan. Pueden ser varias las razones por las que faltan dientes, como traumatismos, edentulismo total o parcial, o caries avanzadas que suponen la extracción del diente debido a que los tratamientos de reconstitución ya no son posibles.

Para la implantología dental se requiere la preparación previa de la mandíbula para que pueda acoplarse el implante dental, que suele constar de un tornillo de titanio con un pilar y una corona protésica de cerámica que imita el diente original que falta.

También existen soluciones protésicas dentales múltiples, que suelen acoplar más de un solo implante.

## 2.6 Contraindicaciones y advertencias para el paciente

No existen contraindicaciones ni advertencias específicas para el paciente respecto a la familia de dispositivos Chiropro 3rd Gen siempre que estos se utilicen de la manera prevista.

## 2.7 En caso de accidentes

Si se produce un accidente, el Chiropro 3rd Gen no debe usarse hasta que lo haya reparado por completo un técnico cualificado y capacitado autorizado por el fabricante.

En el caso de que se produzca un incidente grave relacionado con el dispositivo, debe informar a la autoridad competente de su país, así como al fabricante, a través del distribuidor regional. Consulte las normativas nacionales para conocer los procedimientos rigurosamente.

## 2.8 Notación y enlaces a los capítulos

- **A, B, C**, etc.  
El texto al que precede una letra indica un procedimiento que debe llevarse a cabo paso a paso.
-   
Indica el resultado de un procedimiento.
- **(1), (2), (3)**, etc.  
El texto al que precede un número indica texto utilizado con una ilustración.
- ***OK (Aceptar), Settings (Ajustes)***, etc.  
El texto en cursiva y negrita indica elementos de la pantalla como, por ejemplo, botones, menús, elementos del menú, áreas de pantalla, valores o campos cuando se mencionan y nombres de pantallas.

Para simplificar la notación, en este manual:

- Se usará «CW» para indicar giro a la derecha.
- Se usará «CCW» para indicar giro a la izquierda.
- El modo de rotación del micromotor hacia adelante se representa como «FWD».
- El modo de inversión de la rotación del micromotor se representa como «REV».
- La unidad de velocidad de rotación «revoluciones por minuto» se representa como «rpm».
- La unidad de par de giro «newton centímetro» se representa como «Ncm».
- El equipo de mando del micromotor se representa como «DMX».

# 3 Advertencias y precauciones de uso

## 3.1 Información general

El dispositivo debe ser utilizado por profesionales cualificados y de acuerdo siempre con las disposiciones legales vigentes relativas a la seguridad, a la salud y a las medidas de prevención de accidentes en el entorno laboral, además de estas instrucciones de uso. De acuerdo con tales requisitos, los operadores:

- deben utilizar únicamente dispositivos en perfecto estado de funcionamiento; en caso de que se produzca un funcionamiento intermitente, exceso de vibración, calentamiento anómalo, ruido extraño o cualquier otro indicio que indique que el dispositivo no funciona correctamente, debe detenerse la operación de inmediato; si se da esta situación, póngase en contacto con un centro de reparaciones homologado por Bien-Air Dental SA;
- deben asegurarse de que el dispositivo se utilice únicamente para el fin para el que está previsto y deben protegerse a sí mismos, a los pacientes y a terceros de cualquier peligro.
- Evitar el contacto con líquidos.

## 3.2 Advertencias

### ATENCIÓN

No se autoriza la utilización de este producto para fines distintos a los que aquí se especifican, ya que podría resultar peligroso.

### ATENCIÓN

La clavija del enchufe es el dispositivo de corte utilizado en caso de detectarse algún problema, razón por la cual debe ser fácilmente accesible en todo momento.

### ATENCIÓN

No conecte nunca una pieza de mano a un micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen en funcionamiento.

### ATENCIÓN

Está estrictamente prohibido llevar a cabo cualquier modificación del producto sanitario.

### ATENCIÓN

El dispositivo no está diseñado para ser usado en una atmósfera explosiva (con gas anestésico, por ejemplo).

### ADVERTENCIA

No intente abrir el dispositivo cuando esté conectado a la red eléctrica.  
Riesgo de electrocución.

### ATENCIÓN

Los parámetros incluidos en los procedimientos dentales se ofrecen únicamente a título informativo. Bien-Air Dental SA queda eximido de cualquier responsabilidad sobre estos datos.

### ATENCIÓN

El paciente no debe tocar el aparato.

### ATENCIÓN

No toque de manera simultánea al paciente y las conexiones eléctricas del equipo.

### ATENCIÓN

Asegúrese de que no haya agua debajo del equipo antes de encenderlo.

### ATENCIÓN

Todos los conectores deben estar secos antes de usarlos. Asegúrese de que no queda humedad residual después de limpiarlo.

### ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, este equipo debe conectarse únicamente a una red de alimentación equipada con protección a tierra.

### ADVERTENCIA

Para evitar riesgos de contaminación, controle el dispositivo únicamente con el pie durante los procedimientos quirúrgicos. Si la rueda extraíble se utiliza durante un procedimiento quirúrgico, o entra en contacto con alguna superficie o líquido potencialmente contaminado, siga las medidas de limpieza y esterilización de la rueda que se indican en la sección 11.

# 4 Descripción

## 4.1 Visión general del sistema Chiropro 3rd Gen

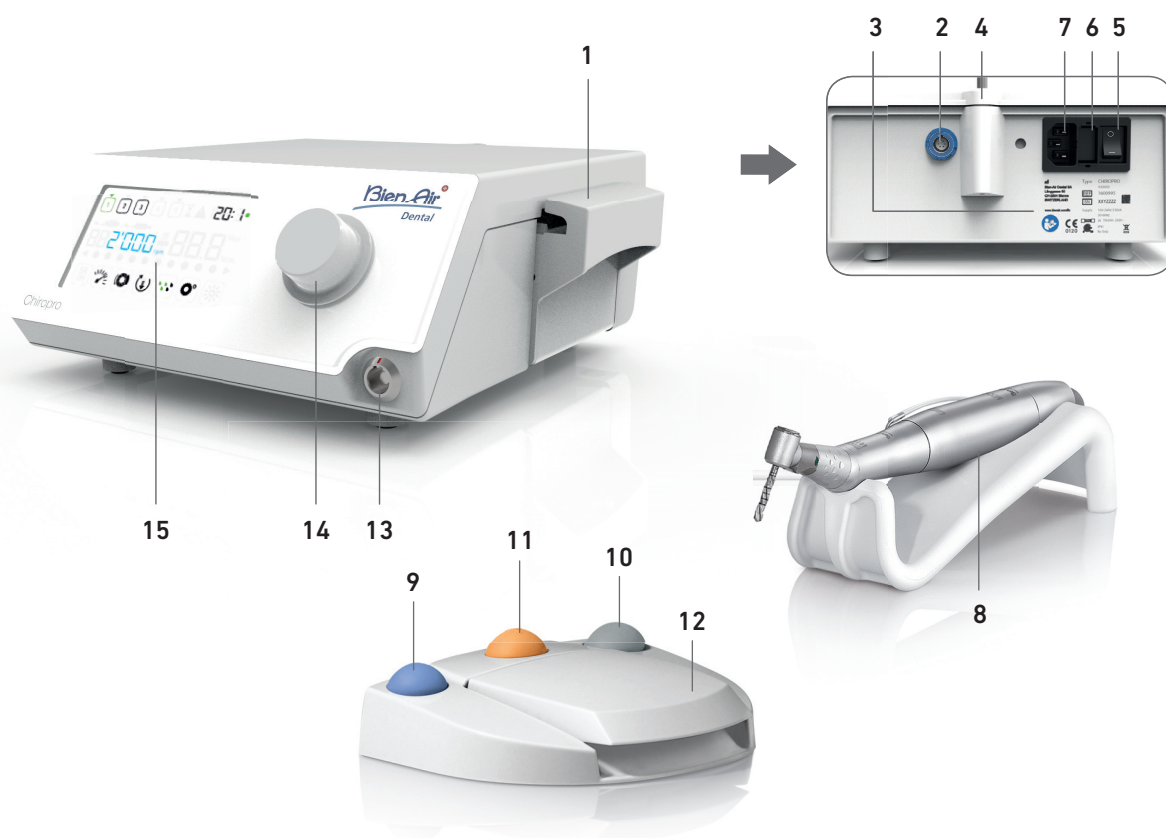


FIG. 1

- |     |                                         |      |                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Tapa de la bomba peristáltica           | (9)  | Botón para iniciar/detener la irrigación                                           |
| (2) | Conector del control de pie             | (10) | Botón para invertir el sentido de giro del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen |
| (3) | Marcado                                 | (11) | Botón de «Programa» para proceder con el siguiente paso de la operación            |
| (4) | Apoyo del soporte                       | (12) | Arranque del motor                                                                 |
| (5) | Interruptor principal                   | (13) | Conector del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen                               |
| (6) | Caja de fusibles                        | (14) | Perilla de control                                                                 |
| (7) | Conector de la red eléctrica            | (15) | Pantalla de control LCD                                                            |
| (8) | Micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen |      |                                                                                    |

## 4.2 Conjuntos suministrados

### Conjunto CHIROPRO 3RD GEN REF. 1700708-001

| Denominaciones                                                                 | Número de REF. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Equipo Chiropr 3rd Gen (1 ud.)                                                 | 1600995-001    |
| Micromotor MX-i LED de 3ª Ger (1 ud.)                                          | 1601008-001    |
| Pedal de 3 botones (1 ud.)                                                     | 1600631-001    |
| Cable MX-i LED 3ª Gen (2 m) (1 ud.)                                            | 1601009-001    |
| Película de protección estéril (2x)                                            | 1502329-002    |
| Paquete de 5 líneas de irrigación estériles de un solo uso                     | 1500984-005    |
| Paquete de 10 retenedores para fijar la línea de irrigación estéril a un cable | 1307727-010    |
| Soporte para botella de líquido (1 ud.)                                        | 1303393-001    |
| Soporte de la pieza de mano (1 ud.)                                            | 1301575-001    |
| Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, 2 m de longitud (1 ud.)                     | 1300067-001    |
| Sistema de cable 3F, Europa, 2,5 m de long. (1 ud.)                            | 1300066-001    |
| Sistema de cable 3F, Suiza, 2 m de long.(1 ud.)                                | 1300065-001    |

### Conjunto CHIROPRO 3RD GEN 20:1 L REF. 1700707-001

| Denominaciones                                     | Número de REF. |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Conjunto Chiropr 3rd Gen (1 ud.)                   | 1700708-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series (luz) (1 ud.) | 1600692-001    |

### Conjunto CHIROPRO 3GEN KM REF. 1700737-001

| Denominaciones                                                                 | Número de REF. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Equipo Chiropr 3rd Gen (1 ud.)                                                 | 1600995-001    |
| Micromotor MX-i LED de 3ª Ger (1 ud.)                                          | 1601008-001    |
| Pedal de 3 botones (1 ud.)                                                     | 1600631-001    |
| Cable MX-i LED 3ª Gen (2 m) (1 ud.)                                            | 1601009-001    |
| Película de protección estéril (2x)                                            | 1502329-002    |
| Paquete de 10 líneas estériles Kirschner/Meyer de un solo uso                  | 1501635-010    |
| Paquete de 10 retenedores para fijar la línea de irrigación estéril a un cable | 1307727-010    |
| Soporte para botella de líquido (1 ud.)                                        | 1303393-001    |
| Soporte de la pieza de mano (1 ud.)                                            | 1301575-001    |
| Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, 2 m de longitud (1 ud.)                     | 1300067-001    |
| Sistema de cable 3F, Europa, 2,5 m de long. (1 ud.)                            | 1300066-001    |
| Sistema de cable 3F, Suiza, 2 m de long.(1 ud.)                                | 1300065-001    |

### Conjunto CHIROPRO 3GEN CA 20:1 L KM REF. 1700736-001

| Denominaciones                                | Número de REF. |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Conjunto Chiropr 3rd Gen KM (1 ud.)           | 1700737-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L KM Micro-Series (luz) | 1600786-001    |

## 4.3 Opciones

| Denominaciones                                                                                                                            | Número de REF. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Control de pie de 3 botones                                                                                                               | 1600631-001    |
| Micromotor MX-i LED 3ª Gen                                                                                                                | 1601008-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L KM Micro-Series (luz)                                                                                             | 1600786-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L KM (luz)                                                                                                          | 1600785-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L Micro-Series (luz)                                                                                                | 1600692-001    |
| Contra-ángulo CA 20:1 L (luz)                                                                                                             | 1600598-001    |
| Pieza de mano recta PM 1:1 Micro-Series                                                                                                   | 1600052-001    |
| Película de protección estéril                                                                                                            | 1502329-002    |
| Paquete de 10 líneas estériles de un solo uso de 3,5 m                                                                                    | 1501738-010    |
| Paquete de 10 líneas estériles Kirschner/Meyer de un solo uso                                                                             | 1501635-010    |
| Conjunto de irrigación desmontable de tipo Kirschner/Meyer para CA 20:1 L KM y CA 20:1 L KM Micro-Series, incluidos 10 anillos y 10 tubos | 1501621-010    |
| Paquete de 10 líneas estériles de un solo uso                                                                                             | 1500984-010    |
| Soporte para botella de líquido                                                                                                           | 1303393-001    |
| Soporte de la pieza de mano                                                                                                               | 1301575-001    |
| Cable MX-i LED 3ª Gen (2 m)                                                                                                               | 1601009-001    |
| Sistema de cable 3F, EE. UU./Asia, 2 m de longitud                                                                                        | 1300067-001    |
| Sistema de cable 3F, Europa, 2,5 m de longitud                                                                                            | 1300066-001    |
| Sistema de cable 3F, Suiza, 2 m de longitud                                                                                               | 1300065-001    |
| Paquete de 10 retenedores para fijar la línea de irrigación estéril a un cable                                                            | 1307727-010    |
| Paquete de 10 fusibles T4.0 Ah 250 V CA, alto poder de corte                                                                              | 1307312-010    |
| Rueda                                                                                                                                     | 1307031-001    |

## 4.4 Datos técnicos

### Dimensiones (longitud x anchura x altura)

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Equipo Chiropr 3rd Gen.....                                        | 240 x 240 x 102 mm |
| Equipo Chiropr 3rd Gen (con soporte) .....                         | 240 x 240 x 482 mm |
| Control de pie (sin mango).....                                    | 206 x 180 x 60 mm  |
| Control de pie (con mango) .....                                   | 206 x 200 x 155 mm |
| Cable del motor (REF. 1601009) .....                               | largo 2,0 m        |
| Cable del control de pie.....                                      | largo 2,9 m        |
| Micromotor MX-i LED 3rd Gen.....                                   | 23 x 84 mm         |
| El control de pie es impermeable (IP X8 de acuerdo con CEI 60529). |                    |

### Peso

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Equipo Chiropr 3rd Gen.....                 | 2,2 kg |
| Control de pie (sin mango y sin cable)..... | 830 g  |
| Control de pie (con mango y cable).....     | 877 g  |
| Soporte.....                                | 115 g  |
| Cable .....                                 | 105 g  |
| Micromotor MX-i LED 3rd Gen.....            | 110 g  |

### Datos eléctricos

|            |              |
|------------|--------------|
| Tensión    | 100-240 V CA |
| Frecuencia | 50-60 Hz     |

## Condiciones ambientales

| Almacenamiento                    |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Intervalo de temperatura:         | 0 °C/+40 °C       |
| Intervalo de humedad relativa:    | 10 % -80 %        |
| Intervalo de presión atmosférica: | 650 hPa -1060 hPa |
| Transporte                        |                   |
| Intervalo de temperatura:         | -20 °C/+50 °C     |
| Intervalo de humedad relativa:    | 5 % -80 %         |
| Intervalo de presión atmosférica: | 650 hPa-1060 hPa  |
| Temperatura de funcionamiento     |                   |
| Intervalo de temperatura:         | +5 °C/+35 °C      |
| Intervalo de humedad relativa:    | 30 % -80 %        |
| Intervalo de presión atmosférica: | 700 hPa-1060 hPa  |

### ⚠ ATENCIÓN

No utilice Chiropro 3rd Gen fuera del intervalo de temperaturas de funcionamiento.

### Clasificación

Clase IIa de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 relativa a los productos sanitarios.

### Grado de aislamiento eléctrico

Clase I según la norma CEI 60601-1 (dispositivo protegido contra descargas eléctricas).

### ⚠ ATENCIÓN

El aparato solo lo puede usar el operador.

### Partes aplicadas (según la norma CEI 60601-1):

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen..... | REF 1601008-001 |
| Pieza de mano recta 1:1.....                 | REF 1600052-001 |
| CA 20:1 L.....                               | REF 1600598-001 |
| CA 20:1 L Micro-Series.....                  | REF 1600692-001 |
| CA 20:1 L KM.....                            | REF 1600785-001 |
| CA 20:1 L KM Micro-Series.....               | REF 1600786-001 |
| Líneas de irrigación.....                    | REF 1500984-010 |
| Líneas de irrigación KM .....                | REF 1501635-010 |

### Grado de protección

EQUIPO.....IP 41 (protección contra la introducción de objetos de tamaño superior a 1 mm y contra las gotas de agua que puedan caer desde arriba)  
Control de pie .....IP X8

### Memoria

Memorización de ajuste de 5 pasos; en cada paso se puede ajustar la velocidad, el par, el sentido de giro, la irrigación y el contra-ángulo.

### Idiomas

Español.

### Soporte para frasco de líquido fisiológico

Acero inoxidable.

### Bomba peristáltica

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Potencia de bombeo.....     | Desde 30 hasta 130 ml/min.<br>(5 niveles)  |
| Manguera para la bomba..... | Ø externo 5,60 mm<br>Ø interior de 2,40 mm |
| Grosor de la pared .....    | 1,60 mm                                    |

## Diseñado para su uso con:

Consulte las instrucciones

de uso

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen..... | REF 2100245 |
| Cable MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen.....      | REF 2100163 |
| Contra-ángulo CA 20:1 L, luz .....           | REF 2100209 |
| Contra-ángulo CA 20:1 L                      |             |
| Micro-Series, luz.....                       | REF 2100209 |
| Contra-ángulo CA 20:1 L KM, luz.....         | REF 2100209 |
| Contra-ángulo CA 20:1 L KM                   |             |
| Micro-Series, luz.....                       | REF 2100209 |
| Pieza de mano recta 1:1 .....                | REF 2100046 |

### ⚠ ATENCIÓN

El uso del sistema con otras piezas de mano, motores o cables no se ha validado/certificado (los valores de par y velocidad de giro no están garantizados en este caso).

### Lista de errores y resolución de problemas

Consulte el apartado "10 Lista de errores y resolución de problemas" en la página 98.

## 4.5 Prestaciones

| Prestaciones                                | REF. 1600995                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de la velocidad del motor        | Precisión de $\pm 5$ % en el intervalo de velocidad de 100-40 000 rpm (*)                                                      |
| Regulación de par del motor                 | Par ajustable del 10 % al 100 % del par máximo                                                                                 |
| Par máximo del motor                        | 5 ( $\pm 5$ %) Ncm (*)                                                                                                         |
| Potencia máxima del motor                   | 95 ( $\pm 10$ %) W (*)                                                                                                         |
| Máxima corriente LED del motor              | 250 ( $\pm 10$ %) mA rms                                                                                                       |
| Máximo intervalo de corriente LED del motor | No es ajustable, siempre funciona a la máxima intensidad                                                                       |
| Límite de alimentación de salida            | <150 W                                                                                                                         |
| Caudal de irrigación                        | 5 niveles:<br>1 gota = 30 ml/min<br>2 gotas = 60 ml/min<br>3 gotas = 90 ml/min<br>4 gotas = 120 ml/min<br>5 gotas = 130 ml/min |

(\*) Medidas realizadas con motores MX-i LED 3rd Gen 1601008 y MX-i LED 1600755, contra-ángulo CA 20:1 L Micro Series 1600692 o pieza de mano PML 1121 1600156. El par máximo se mide a 1000 rpm con irrigación detenida y se corresponde con un par máximo de 70 Ncm de la herramienta de rotación si el motor se combina con el contra-ángulo CA 20:1 L Micro Series 1600692.

Según la norma 80601-2-60, no se vincula ninguna prestación esencial a este equipo dental.

## 4.6 Protección del medioambiente e indicaciones para el desecho



La eliminación o el reciclaje de los materiales debe realizarse según la legislación en vigor.



Recogida por separado de equipos y accesorios eléctricos y electrónicos con vistas a reciclarlos.

Los equipos eléctricos o electrónicos pueden contener sustancias nocivas para la salud, así como para el medioambiente. El usuario debe devolver el dispositivo a su distribuidor o dirigirse directamente a un establecimiento autorizado para el tratamiento y la recuperación de este tipo de aparatos (Directiva Europea 2012/19/UE).

## 4.7 Compatibilidad electromagnética (descripción técnica)

### 4.7.1 Precauciones de uso

Este mando electrónico responde a las normas de seguridad eléctrica de conformidad con la norma CEI 60601-1, edición 3.1, así como a aquellas relativas a la compatibilidad electromagnética, según lo estipulado en la norma CEI 60601-1-2 (cuarta edición).

### 4.7.2 Advertencias de compatibilidad electromagnética

#### ⚠ ATENCIÓN

Chiropro 3rd Gen cumple los requerimientos de EMC según la norma IEC 60601-1-2. No deben utilizarse equipos de radiotransmisión, teléfonos móviles, etc. en las inmediaciones del dispositivo, ya que podrían afectar a su funcionamiento. El aparato no debe usarse cerca de equipos quirúrgicos de alta frecuencia, equipos de resonancia magnética (RM) u otros aparatos similares en los que la intensidad de las perturbaciones electromagnéticas sea elevada. En cualquier caso, asegúrese de que no pase ningún cable de alta frecuencia por encima o cerca del aparato. En caso de duda, póngase en contacto con un técnico cualificado o con Bien-Air Dental SA.

Los aparatos de comunicación de RF portátiles (incluidos los periféricos como los cables de antena y las antenas exteriores) deben usarse a una distancia superior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier pieza de Chiropro 3rd Gen, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, el funcionamiento del equipo podría verse afectado negativamente.

#### ⚠ ATENCIÓN

La utilización de accesorios, transductores y cables diferentes a los que se especifican, exceptuando los transductores y cables que vende Bien-Air Dental SA como piezas de recambio para los componentes internos, puede ocasionar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad.

### 4.7.3 Compatibilidad electromagnética: emisiones e inmunidad

#### Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Chiropro 3rd Gen está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de Chiropro 3rd Gen debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

| Prueba de emisiones                                        | Conformidad | Entorno electromagnético: guía                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones RF CISPR 11                                      | Grupo 1     | Chiropro 3rd Gen utiliza energía de RF únicamente para el funcionamiento interno. Por tanto, las emisiones de RF que produce son muy bajas y es improbable que causen interferencias en los equipos electrónicos cercanos.                           |
| Emisiones RF CISPR 11                                      | Clase B     | Chiropro 3rd Gen puede usarse en cualquier edificio, incluidos los edificios residenciales y aquellos con conexión directa a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios utilizados con fines residenciales. |
| Emisiones armónicas CEI 61000-3-2                          | Clase A     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emisiones debidas a fluctuaciones de tensión CEI 61000-3-3 | Conforme    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Chiropro 3rd Gen está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o usuario de Chiropro 3rd Gen debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.

| Prueba de inmunidad                                         | Nivel de prueba CEI 60601                                                                           | Nivel de conformidad                                                                                | Entorno electromagnético: guía                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga electrostática (ESD)<br>CEI 61000-4-2              | ±8 kV con contacto<br>±2 kV en el aire<br>±4 kV en el aire<br>±8 kV en el aire<br>±15 kV en el aire | ±8 kV con contacto<br>±2 kV en el aire<br>±4 kV en el aire<br>±8 kV en el aire<br>±15 kV en el aire | El suelo debe ser de madera, de cemento o de baldosas de cerámica. Si los suelos están recubiertos de materiales sintéticos, es conveniente que la humedad relativa sea del 30 % como mínimo. |
| Ráfagas de transitorios eléctricos rápidos<br>CEI 61000-4-4 | ±2 kV para líneas de suministro eléctrico<br>±1 kV para otras líneas                                | ±2 kV para líneas de suministro eléctrico<br>N/A                                                    | La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.                                                                                                            |

| Prueba de inmunidad                                                                                                                      | Nivel de prueba CEI 60601                                                                                                                                                                                               |                   | Nivel de conformidad                                                                                                                                                                                                    |  | Entorno electromagnético: guía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobretensión transitoria<br>CEI 61000-4-5                                                                                                | ±0,5 kV entre líneas<br>±1 kV entre líneas<br>±0,5 kV de línea a tierra<br>±1 kV de línea a tierra<br>±2 kV de línea a tierra                                                                                           |                   | ±0,5 kV entre líneas<br>±1 kV entre líneas<br>±0,5 kV de línea a tierra<br>±1 kV de línea a tierra<br>±2 kV de línea a tierra                                                                                           |  | La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Huecos de tensión, interrupciones cortas y variaciones de la tensión en las líneas de entrada del suministro eléctrico<br>CEI 61000-4-11 | 0 % U <sub>T</sub> para 0,5 ciclos, a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°<br><br>0 % U <sub>T</sub> para 1 ciclo y<br>70 % U <sub>T</sub> para 25/30 ciclos a 0°<br><br>0 % U <sub>T</sub> para 250 ciclos a 0° |                   | 0 % U <sub>T</sub> para 0,5 ciclos, a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°<br><br>0 % U <sub>T</sub> para 1 ciclo y<br>70 % U <sub>T</sub> para 25/30 ciclos a 0°<br><br>0 % U <sub>T</sub> para 250 ciclos a 0° |  | La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario. Si el usuario de Chiropro 3rd Gen necesita un funcionamiento continuado durante los cortes de la red de alimentación eléctrica, se recomienda alimentar Chiropro 3rd Gen con un sistema de alimentación ininterrumpida o con una batería.                                                                                              |
| Campo magnético debido a la frecuencia de la red (50/60 Hz)<br>CEI 61000-4-8                                                             | 30 A/m                                                                                                                                                                                                                  |                   | 30 A/m                                                                                                                                                                                                                  |  | Los campos magnéticos generados por la frecuencia de la red deben situarse a niveles propios de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF<br>CEI 61000-4-6                                                                    | 3 V <sub>RMS</sub><br>0,15 MHz-80 MHz<br><br>6 V <sub>RMS</sub> en bandas ISM<br>0,15 MHz-80 MHz<br><br>80 % AM a 1 kHz                                                                                                 |                   | 3 V <sub>RMS</sub><br>0,15 MHz-80 MHz<br><br>6 V <sub>RMS</sub> en bandas ISM<br>0,15 MHz-80 MHz<br><br>80 % AM a 1 kHz                                                                                                 |  | La intensidad del campo de los transmisores de RF fijos, determinada mediante un estudio del campo electromagnético <sup>a</sup> , debe ser inferior al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencia.<br>Es posible que se produzcan interferencias en los alrededores de los equipos marcados con el siguiente símbolo:<br> |
| Campos electromagnéticos RF radiados<br>CEI 61000-4-3                                                                                    | 3 V/m<br>80 MHz-2,7 GHz<br>80 % AM a 1 kHz                                                                                                                                                                              |                   | 3 V/m<br>80 MHz-2,7 GHz<br>80 % AM a 1 kHz                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Campos de proximidad desde un equipo de comunicación RF inalámbrico<br>CEI 61000-4-3                                                     | Frec. prueba [MHz]                                                                                                                                                                                                      | Potencia máx. [W] | Nivel de la prueba de inmunidad [V/m]                                                                                                                                                                                   |  | Distancia: 0,3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          | 385                                                                                                                                                                                                                     | 1,8               | 27                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 450                                                                                                                                                                                                                     | 2                 | 28                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 710, 745, 780                                                                                                                                                                                                           | 0,2               | 9                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 810, 870, 930                                                                                                                                                                                                           | 2                 | 28                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 1720, 1845, 1970                                                                                                                                                                                                        | 2                 | 28                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 2450                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | 28                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5240, 5500, 5785                                                                                                                         | 0,2                                                                                                                                                                                                                     | 9                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOTA: U <sub>T</sub> es la con de red CA previa a la aplicación del nivel de prueba.                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

a. La intensidad del campo de los transmisores fijos, como las estaciones base para radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, radiodifusión AM y FM y emisión de televisión, no se puede predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético producido por los transmisores de RF fijos, debería considerarse la posibilidad de realizar un estudio del campo electromagnético. Si la intensidad del campo medida en la ubicación donde se usa Chiropro 3rd Gen supera el nivel de conformidad de RF mencionado, se debería observar Chiropro 3rd Gen para verificar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, puede ser necesario recurrir a otras medidas adicionales, como una reorientación o reubicación de Chiropro 3rd Gen.

# 5 Instalación



FIG. 1



FIG. 2

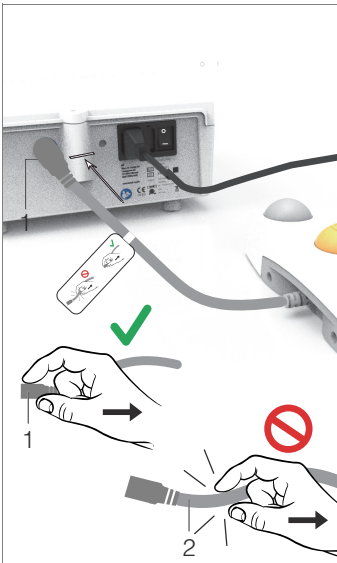


FIG. 3



FIG. 4

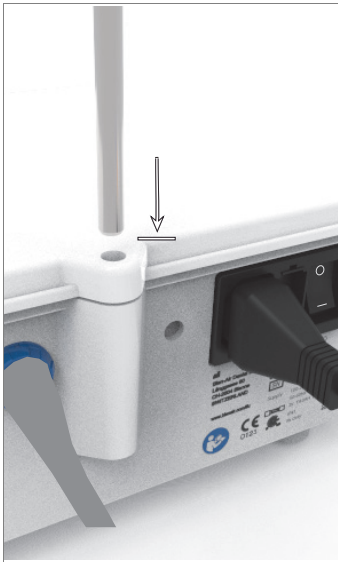


FIG. 5

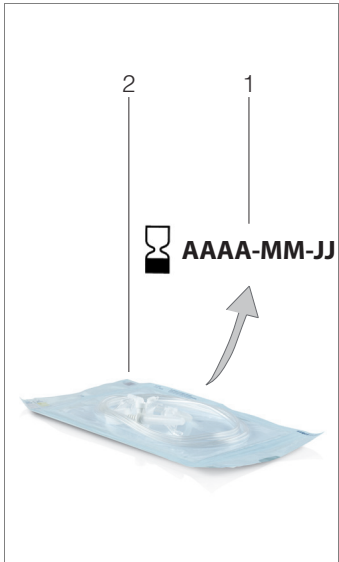


FIG. 6

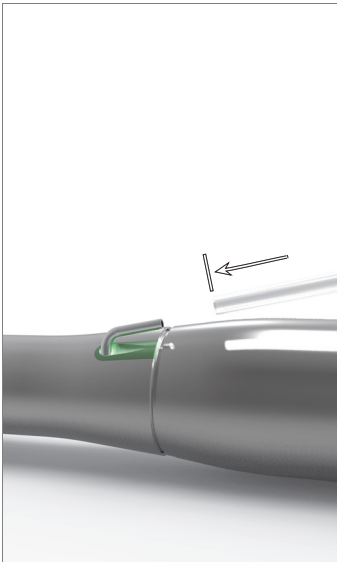


FIG. 7

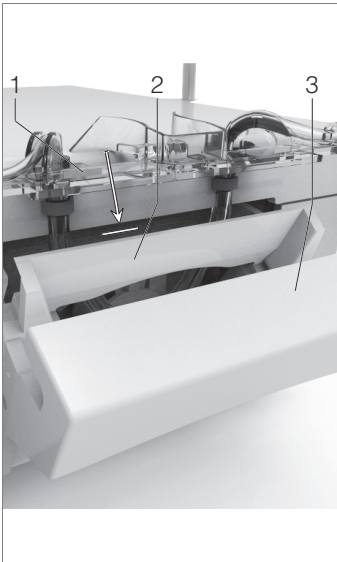


FIG. 8

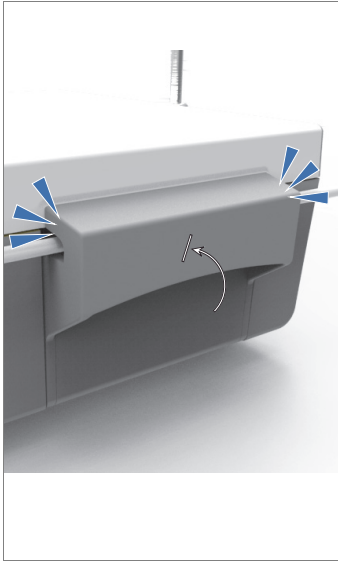


FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11

## 5.1 Instalación del sistema Chiropro 3rd Gen

FIG. 1

- A. Coloque el dispositivo Chiropro 3rd Gen sobre una superficie plana capaz de soportar su peso.

### ⚠ ATENCIÓN

Puede colocarse sobre una mesa, un carrito o cualquier otra superficie, pero en ningún caso en el suelo.

FIG. 2

- B. La caja de fusibles puede abrirse con un destornillador.  
100-240 V CA = fusible T4,0 Ah 250 V CA. REF. 1307312-010.  
*Para sustituir un fusible, consulte el capítulo "11.4 Sustitución de fusibles" en la página 101.*

- C. Conecte el cable de alimentación (1) al conector (2).

### Nota 1

FIG. 3

- D. Conecte el cable del control de pie a la entrada situada en el panel trasero, guiando el conector y el enchufe por medio de la clavija de guía del conector.

### ⚠ ATENCIÓN

No suba el control de pie sujetando el cable de conexión.  
Para desconectar el cable del control de pie, tire del conector de la toma de cable (1).  
No tire del cable (2) sin desconectar antes la toma de cable.

FIG. 4

- E. Conecte el cable del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen a la salida del motor, guiando el conector y el enchufe por medio de la clavija de guía del conector.

FIG. 5

- F. Alinee y fije el soporte al alojamiento situado en la parte trasera de la consola y cuelgue el frasco o la botella.

FIG. 6

- G. Compruebe la integridad del embalaje, así como la fecha de caducidad de la línea de irrigación indicada en la etiqueta (1).

### ⚠ ADVERTENCIA

El producto sanitario se debe utilizar únicamente con las líneas suministradas por Bien-Air Dental para garantizar un funcionamiento sin incidencias. Estas líneas son estériles y de uso único. Si se reutilizan, puede contaminarse microbiológicamente al paciente.

- H. Extraiga la línea de irrigación estéril y de uso único (2) de la bolsita.

FIG. 7

- I. Conecte el tubo flexible de la línea de irrigación al tubo externo de la pieza de mano o del contra-ángulo.

FIG. 8

- J. Instale el cassette peristáltico (1) en la bomba peristáltica (2). Compruebe que esté correctamente encajado.

FIG. 9

- K. Cierre la tapa de la bomba (3). Si se percibe resistencia al cerrarla, vuelva a abrir la tapa y compruebe que el cassette esté correctamente colocado. Al cerrar la tapa debe oírse un clic, lo que indica que se ha cerrado correctamente.

### ⚠ ATENCIÓN

No ponga en funcionamiento la bomba mientras la tapa esté abierta.

### ⚠ ATENCIÓN

No haga funcionar la bomba sin línea de irrigación.

### ⚠ ATENCIÓN

Riesgo de atrapamiento.

FIG. 10

- L. Perfore la tapa del frasco de líquido fisiológico con el extremo puntiagudo de la línea de irrigación tras haber retirado la cubierta de protección.

### ⚠ ATENCIÓN

No se ha detectado ningún frasco de líquido fisiológico vacío. Antes de usarlo, compruebe siempre el contenido del frasco.

FIG. 11

- M. Fije la línea de irrigación en el cable del motor utilizando los 3 retenedores REF. 1307727-010.

## 5.2 Procedimiento de encendido/apagado

El dispositivo puede encenderse y apagarse con total seguridad utilizando el interruptor principal del Chiropro 3rd Gen.

### ⚠ ATENCIÓN

No apague el aparato si el motor está funcionando.

## NOTAS

- 1 El aparato recibe alimentación por medio de la red eléctrica (100-240 V CA, 150 W, 50-60 Hz).

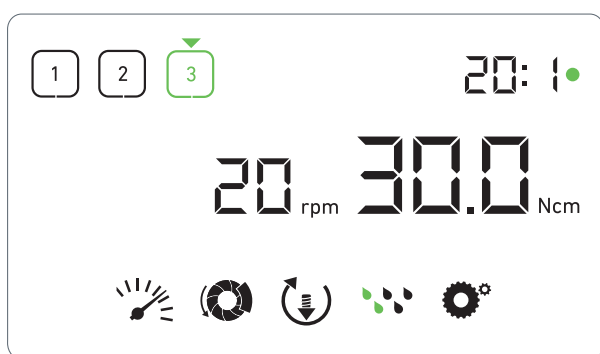


FIG. 1

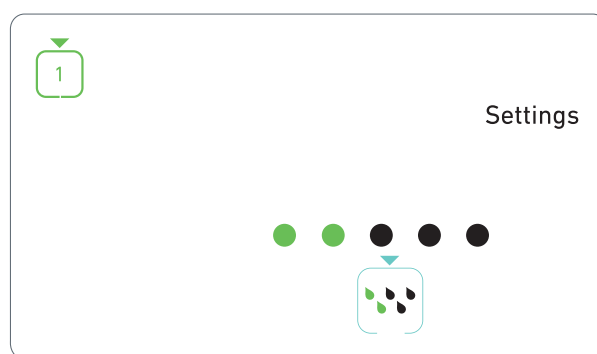


FIG. 2

## 6 Visión general de la interfaz

### 6.1 Modos Chiropro 3rd Gen

El Chiropro 3rd Gen permite visualizar y controlar los parámetros de funcionamiento por medio de la pantalla LCD.

Una pantalla única permite utilizar los siguientes modos:

#### FIG. 1

- Modo funcionamiento (para realizar una operación en 3 pasos)

Consulte el apartado "7 Operación" en la página 92 para obtener más información.

#### FIG. 2

- Modo ajustes (para establecer los parámetros de funcionamiento)

Consulte el apartado "8 Ajustes" en la página 94 para obtener más información.

#### FIG. 3

- Modos especiales (para comprobar el sistema y restaurar los ajustes)

Consulte el apartado "9 Modos especiales" en la página 96 para obtener más información.

#### FIG. 4

**A.** Al mantener pulsada la rueda giratoria (1) se cambia de modo de funcionamiento a modo de ajustes y viceversa.

#### Nota 1

Consulte el apartado "6.2 Vista general de las funciones de la rueda de rotación" en la página 90 para obtener más información.

Consulte el apartado "9 Modos especiales" en la página 96 para acceder a los modos especiales.

### 6.2 Vista general de las funciones de la rueda de rotación

#### Nota 2

| Accionamiento de la rueda                    | Descripción                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giro hacia la derecha                        | Aumente el valor de corriente, vaya al elemento de la derecha                                                                                  |
| Giro hacia la izquierda                      | Disminuya el valor de corriente, vaya al elemento de la izquierda                                                                              |
| Una pulsación corta (Modo de funcionamiento) | Vaya al siguiente paso programado, confirme mensajes de error                                                                                  |
| Una pulsación corta (Modo ajustes)           | Introduzca el parámetro seleccionado, válidelos y guarde el valor del parámetro actual, salga del parámetro actual, confirme mensajes de error |
| Pulsación larga                              | Cambio de modo de funcionamiento a modo de ajustes y viceversa                                                                                 |
| Pulsación corta doble                        | Acceso a los modos especiales (solo si la relación de transmisión está seleccionada en el modo de ajustes)                                     |

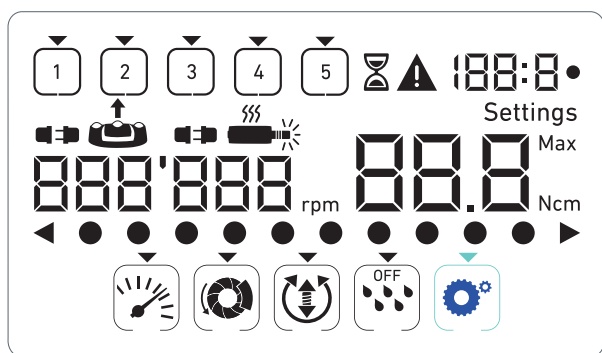


FIG. 3

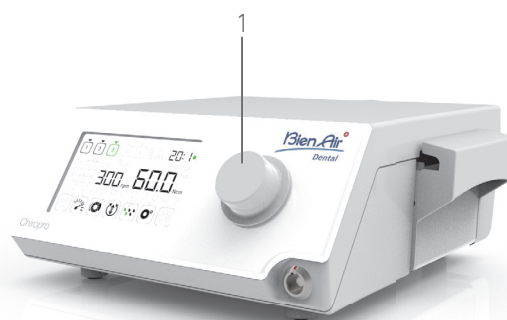


FIG. 4

### 6.3 Alarmas acústicas



| Alarma acústica              | Descripción                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un pitido corto              | Activación de la irrigación, acceso al paso siguiente y cambio del sentido de giro a AVANCE |
| Dos pitidos cortos           | Desactivación de la irrigación y cambio del sentido de giro a INVERSIÓN                     |
| Dos pitidos prolongados      | Cambio del paso programado de baja velocidad a alta velocidad                               |
| Pitidos cortos alternos      | Notificaciones de advertencia                                                               |
| Pitidos intermedios alternos | Indicador de funcionamiento del micro-motor en modo INVERSIÓN                               |
| Pitidos largos alternos      | Notificación de fallo del sistema                                                           |

### NOTAS

- 1 El modo funcionamiento es el modo de inicio por defecto.
- 2 Toda acción sobre las ruedas y el control de pie se ignorará si el motor está en marcha.

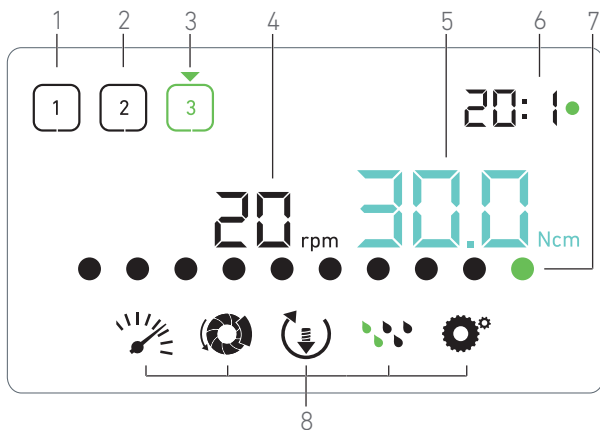


FIG. 1

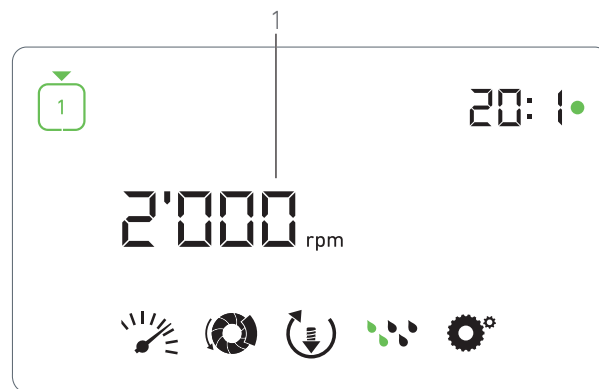


FIG. 2

## 7 Operación

### 7.1 Descripción de la Pantalla operación

FIG. 1

La Pantalla operación será diferente si el micromotor está detenido o en funcionamiento y en función de cuál sea el paso activo.

Permite realizar una operación en 3, 4 o 5 pasos predefinidos P1, P2, P3, P4, P5 (que se pueden usar respectivamente para programar los ajustes para la preparación del hueso, el taladrado y la inserción del implante y la corona), y muestra la siguiente información:

- (1) Paso P1 (inactivo, en negro)
- (2) Paso P2 (inactivo, en negro)
- (3) Paso P3 (activo, en verde)

Los pasos P4 y P5 están deshabilitados por defecto; para habilitarlos, vaya a "Número de pasos" en la página 96.

- (4) Velocímetro

Nota 1

- (5) Medidor de par

Nota 2

- (6) Contra-ángulo

Nota 3

- (7) Gráfica de barras de par

Nota 4

- (8) Símbolos de los ajustes de la operación

Consulte el apartado "8 Ajustes" en la página 94 para obtener información sobre cómo regular los ajustes.

### 7.2 Realizar una operación, pasos P1 y P2

FIG. 2

A. Para usarlo, presione el control de pie y ajuste la velocidad de giro del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen.

Los símbolos de los pasos inactivos se apagan cuando el motor está en marcha.

El velocímetro muestra la velocidad en tiempo real, en negro.

Nota 5 - 6 - 7

FIG. 3

B. En caso necesario, suelte el control de pie para realizar las siguientes acciones:

El velocímetro (1) muestra en cian la máxima velocidad posible configurada en el micromotor.

- Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para aumentar o disminuir, respectivamente, la máxima velocidad posible del micromotor (modo de ajuste rápido).

El velocímetro es cian y muestra la máxima velocidad posible configurada en el micromotor (1).

Nota 8

- Si se mantiene pulsada la rueda, se pueden cambiar los ajustes de funcionamiento.

Se muestra el modo de ajustes.

Consulte el apartado "8 Ajustes" en la página 94 para obtener más información.

- Al mantener pulsado el botón naranja se activa el aumento de par de 5 Ncm.

Nota 9

C. Pulse brevemente el botón naranja del control de pie o la rueda para continuar con el siguiente paso.

El símbolo de siguiente paso se pone verde y se restablecen los últimos ajustes de este paso.

Nota 7 - 10

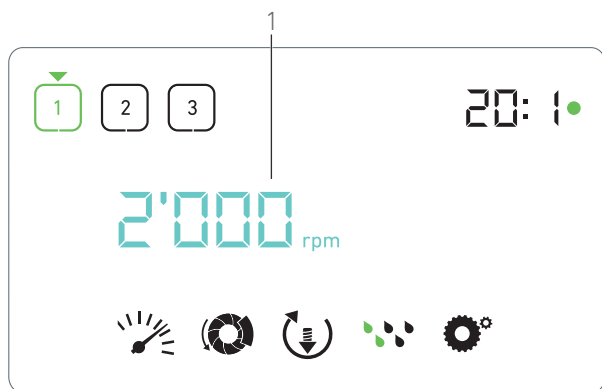


FIG. 3

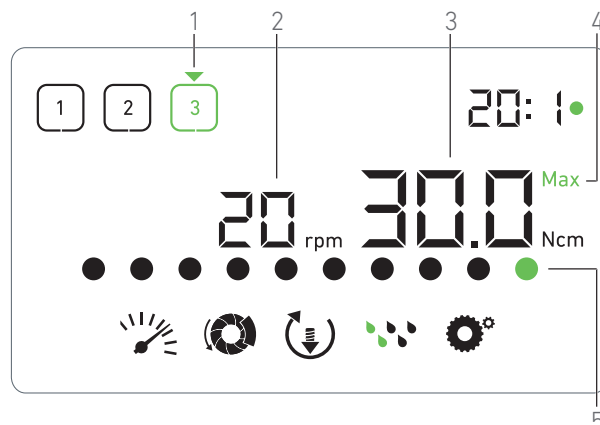


FIG. 4

### 7.3 Realizar una operación, pasos P3, P4 y P5

FIG. 4

A. En los pasos P3 (1), P4 y P5, presione el control de pie para ajustar la velocidad de giro del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen.

↳ Todos los símbolos de los pasos inactivos se apagan cuando el motor está en marcha.

↳ El velocímetro (2) muestra el valor en tiempo real.

↳ El medidor de par (3) muestra el valor en tiempo real.

↳ La barra de par (5) muestra la relación entre el valor de par en tiempo real (se representa con puntos de color cian cuando el micromotor está en marcha) y el par máximo alcanzado (puntos verdes).

#### Nota 5 - 6 - 7

B. En caso necesario, suelte el control de pie para realizar las siguientes acciones:

↳ El medidor de par (3) muestra el valor máximo alcanzado junto con el símbolo **Max** (4).

↳ Los puntos de la barra de par (5) que se muestran en cian pasan a negro, salvo el punto de valor máximo, que se pone en verde.

- Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para aumentar o disminuir, respectivamente, el máximo par posible del micromotor (modo de ajuste rápido).

↳ El medidor de par (3) se vuelve cian y muestra el par máximo posible configurado en el micromotor.

#### Nota 11

- Si se mantiene pulsada la rueda, se pueden cambiar los ajustes de funcionamiento.

Consulte el apartado "8 Ajustes" en la página 94 para obtener más información.

- Al mantener pulsado el botón naranja se activa el aumento de par de 5 Ncm.

#### Nota 9

C. Pulse brevemente el botón naranja del control de pie o la rueda para continuar con el siguiente paso.

↳ El símbolo de siguiente paso se pone verde y se restablecen los últimos ajustes de este paso.

#### Nota 7 - 10

## NOTAS

1 El valor de la velocidad en tiempo real se muestra en negro cuando el micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen está en funcionamiento. El máximo valor posible de velocidad se muestra en cian cuando el micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen no está en funcionamiento, en los pasos P1 y P2.

2 El medidor de par solo se muestra cuando la velocidad del micromotor está por debajo de 100 rpm en los pasos P1 y P2.

3 El contra-ángulo será de color cian para transmisión directa y verde para engranajes de reducción.

4 La gráfica de barras de par solo se muestra cuando la velocidad del micromotor es inferior a 100 rpm.

5 Los ajustes de cada paso se restablecen desde los últimos ajustes utilizados en el paso correspondiente, salvo los ajustes rápidos que se hacen directamente en el modo funcionamiento.

6 En el modo de INVERSIÓN, el símbolo de sentido de giro (🔄) parpadea y se escucha una alarma acústica (pitidos intermedios alternos). El valor de par aumenta automáticamente en el modo de inversión cuando se muestra el medidor de par. El valor del par puede aumentar de 0 a 10 Ncm, ver capítulo "Valor de aumento del par de inversión" en la página 96 para ajustarlo.

7 Presionar los botones del control de pie no tiene ningún efecto si el micromotor está en marcha.

8 El cambio de par, en los pasos P1 o P2, solo se puede realizar en el modo de ajustes.

9 El aumento del par solo se puede activar cuando el medidor de par se muestra en el modo funcionamiento, en pasos de baja velocidad de giro (<100 rpm).

10 Por motivos de seguridad, el icono de ajuste de la velocidad se vuelve rojo y parpadea junto con el velocímetro durante 2 segundos cuando se pasa del paso de baja velocidad al de alta velocidad (≥100 rpm).

11 El cambio de velocidad, en los pasos P3, P4 y P5, solo se puede realizar en el modo ajustes.

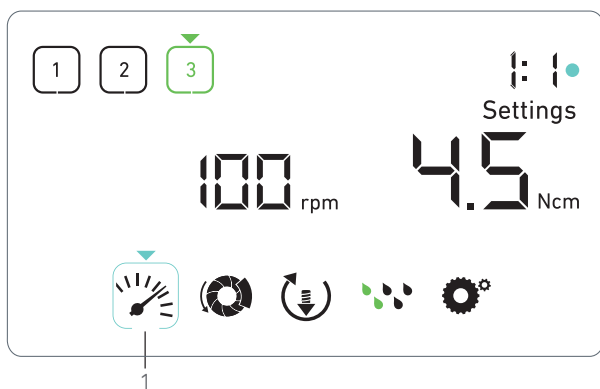


FIG. 1

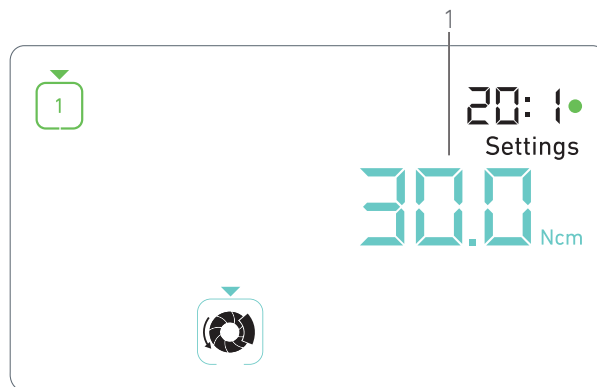


FIG. 2

## 8 Ajustes

FIG. 1

El modo de ajustes permite cambiar todos los parámetros de cada paso.

Se accede a él manteniendo pulsada la rueda del modo funcionamiento y se abandona si se pulsa prolongadamente también la rueda o si se pone en marcha el motor.

Todos los cambios que se hacen en este modo se guardan automáticamente para el paso correspondiente.

### Nota 1

A. Desde el modo de ajustes, navegue por los parámetros de funcionamiento girando la rueda hacia la derecha o la izquierda.

✚ El símbolo de los parámetros seleccionados (1) se encaja en un cuadro cian y habrá una flecha señalándolo.

B. En caso necesario, pulse brevemente el botón naranja del control de pie para continuar con el siguiente paso sin volver al modo funcionamiento.

✚ El modo de ajustes se sigue mostrando, el símbolo de siguiente paso se pone verde y se restablecen los últimos ajustes de este paso.

C. Pulse una vez la rueda para cambiar los ajustes de parámetros seleccionados (submodo ajustes).

✚ Se muestra el submodo de ajustes seleccionado.

### 8.1 Velocidad de giro del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen

A. Desde el menú del modo de ajustes, seleccione el símbolo  y pulse una vez la rueda para cambiar la máxima velocidad posible.

FIG. 2

B. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para aumentar o disminuir, respectivamente, la máxima velocidad posible del micromotor.

✚ El velocímetro (1) muestra la máxima velocidad posible configurada en el motor.

C. Pulse una vez la rueda para salir de los ajustes de velocidad.

✚ Se ha guardado una nueva velocidad posible y el menú del modo de ajustes se vuelve a mostrar, FIG. 1.

### 8.2 Par del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen

A. Desde el menú del modo de ajustes, seleccione el símbolo  y pulse una vez la rueda para cambiar la máxima velocidad posible.

FIG. 3

B. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para aumentar o disminuir, respectivamente, el máximo par posible del micromotor.

✚ El medidor de par (1) muestra la máxima velocidad posible configurada en el par.

C. Pulse una vez la rueda para salir de los ajustes de par.

✚ Se ha guardado un nuevo par posible y el menú del modo de ajustes se vuelve a mostrar, FIG. 1.

### 8.3 Sentido de giro del micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen

A. Desde el menú del modo de ajustes, seleccione el símbolo  y pulse una vez la rueda para cambiar el sentido de giro.

#### Nota 1

B. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para alternar la rotación del micromotor entre AVANCE  e INVERSIÓN .

C. Pulse una vez la rueda para salir de los ajustes de sentido de giro.

✚ El sentido de giro se guarda y el menú de modo de ajustes se vuelve a mostrar.

#### Nota 2

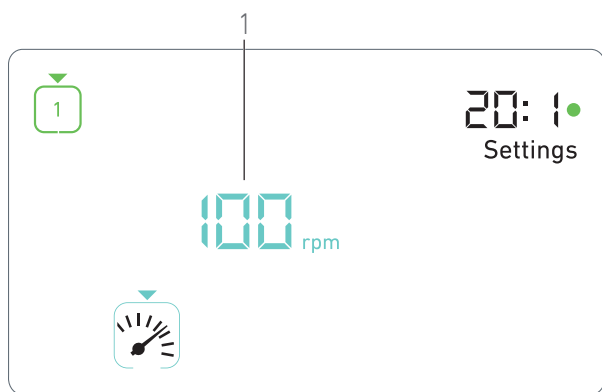


FIG. 3

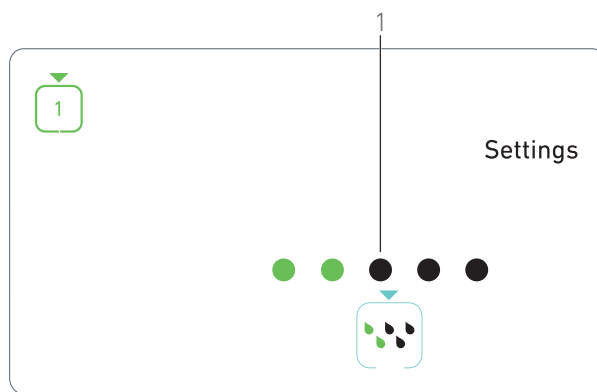


FIG. 4

## 8.4 Nivel de irrigación

- A.** Desde el menú del modo de ajustes, seleccione el símbolo  y pulse una vez la rueda para cambiar el nivel de irrigación.

*Nota 1*

**FIG. 4**

- B.** Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para configurar el nivel de irrigación (1).  
Existen 5 niveles de ajuste:  
30 ml/min, 60 ml/min, 90 ml/min, 120 ml/min,  
130 ml/min.

*Nota 3*

- C.** Pulse una vez la rueda para salir de los ajustes de nivel de irrigación.

 El nivel de irrigación se guarda y el menú de modo de ajustes se vuelve a mostrar.

## 8.5 Contra-ángulo

- A.** Desde el menú del modo de ajustes, seleccione el símbolo  y pulse una vez la rueda para cambiar el contra-ángulo.
- B.** Gire la rueda a derecha o izquierda para cambiar el contra-ángulo.

*Nota 4*

- C.** Pulse una vez la rueda para salir de los ajustes de contra-ángulo.

 El contra-ángulo se guarda y el menú de modo de ajustes se vuelve a mostrar.

## NOTAS

**1** Los símbolos de sentido de giro y nivel de irrigación serán diferentes en función de los ajustes.

**2** El valor de par aumenta automáticamente en el modo de INVERSIÓN cuando se muestra el medidor de par. El valor del par puede aumentar de 0 a 10 Ncm, ver capítulo "Valor de aumento del par de inversión" en la página 96 para ajustarlo.

**3** Cuando el nivel de irrigación se ajusta a OFF, todos los puntos (1) se muestran en negro. El nivel de irrigación está apagado cuando la irrigación está totalmente apagada por medio del botón azul del control de pie, independientemente del paso activo. En este caso, el símbolo OFF se muestra en el modo funcionamiento. La irrigación se considera un ajuste rápido y por ello se enciende cuando se empieza desde el paso P1.

**4** El contra-ángulo será de color cian para transmisión directa y verde para engranajes de reducción.

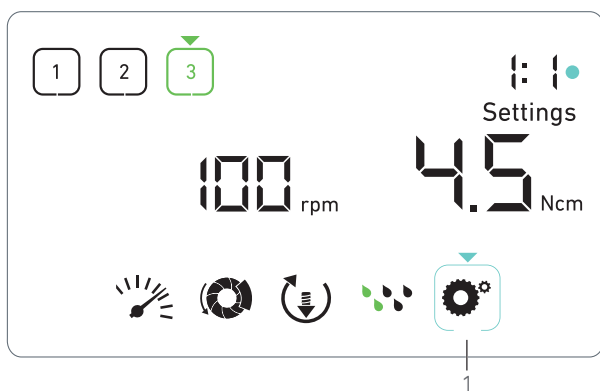


FIG. 1

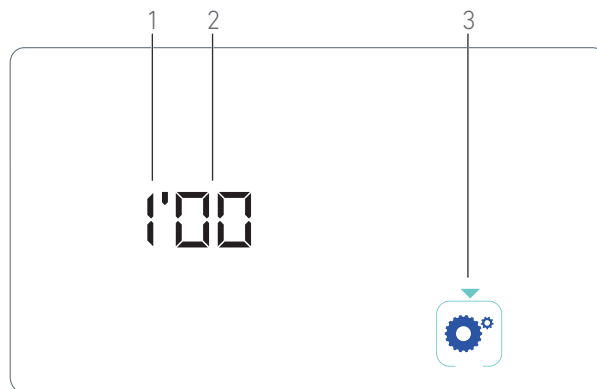


FIG. 2

## 9 Modos especiales

Los modos especiales permiten, en el siguiente orden:

- Mostrar la versión de software;
- probar la pantalla LCD;
- definir del número de pasos (3, 4 o 5);
- definir el valor de aumento del par de inversión;
- restaurar ajustes de fábrica.

### Nota 1

A. Desde el modo funcionamiento, mantenga pulsada la rueda de rotación para acceder a los modos de ajustes.

Se muestra el modo de ajustes.

FIG. 1

B. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para seleccionar el símbolo de contra-ángulo (1).

El símbolo de contra-ángulo se encaja en un cuadro cyan y habrá una flecha señalándolo.

### Versión de software

FIG. 2

C. Haga dos pulsaciones cortas en la rueda para acceder a los modos especiales.

El símbolo de contra-ángulo (3) se vuelve azul para diferenciarlo del símbolo cyan de cambio de ángulo.

La versión de software se muestra de la siguiente manera:

- (1) Versión principal
- (2) Versión secundaria

### Prueba de la pantalla LCD

FIG. 3

D. Pulse una vez la rueda para probar la pantalla LCD.

Todos los puntos se muestran en negro, excepto el símbolo de contra-ángulo (1).

### Número de pasos

E. Pulse una vez en la rueda para definir el número de pasos.

Se muestra la pantalla con el número de paso.

F. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para mostrar, alternativamente, el texto **3**, **4** o **5**.

G. Pulse una vez en la rueda para definir el número de pasos.

### Valor de aumento del par de inversión

El aumento del par de inversión permite un aumento automático del valor del par, si está en modo INVERSIÓN, para facilitar la rotación de la fresa cuando se queda atascada.

H. Pulse una vez la rueda para definir el valor de aumento del par de inversión.

Se muestra la pantalla de aumento del par de inversión.

I. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para mostrar, alternativamente, el texto **0**, **5** o **10**.

J. Pulse una vez la rueda para definir el valor de arranque si aparece un **0**, o pulse una vez la rueda para definir respectivamente el valor de aumento a 5 Ncm o 10 Ncm cuando se muestra un **5** o un **10**.

### Restaurar ajustes

FIG. 4

K. Pulse una vez la rueda para visualizar la pantalla de reseteo de los ajustes de fábrica.

Se muestra la pantalla de reseteo de los ajustes de fábrica.

L. Gire la rueda hacia la derecha o la izquierda para mostrar, alternativamente, el texto **reset yes (restaurar)**, o **reset no (no restaurar)** (1).

### Nota 3

M. Pulse una vez la rueda para restaurar los ajustes de fábrica cuando se muestre el texto **reset yes (restaurar)**, o pulse una vez para volver al modo de ajustes cuando se muestre el texto **reset no (no restaurar)**.

Puede tardar hasta 2 segundos en restaurarse. Mientras tanto, se muestra el símbolo ⌛, y el texto **yes (restaurar)** se apaga. Cuando ya se ha restaurado, el modo de ajustes se vuelve a mostrar.

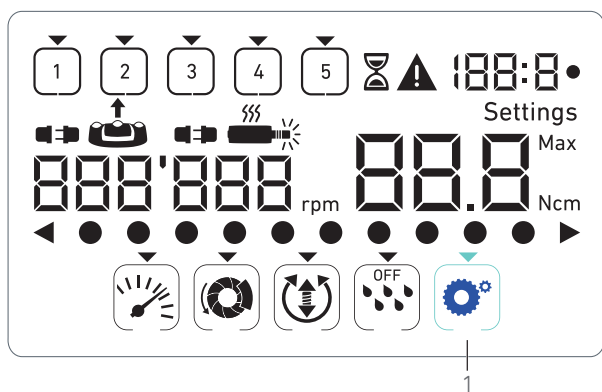


FIG. 3

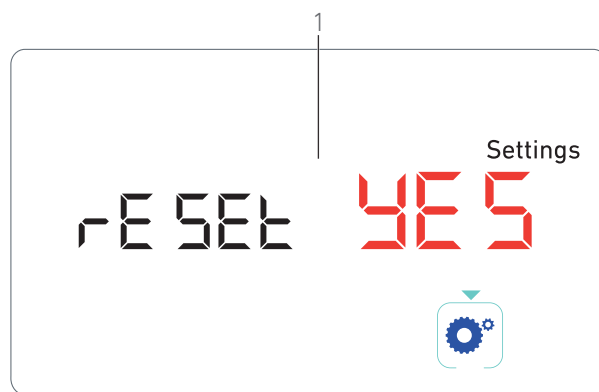


FIG. 4

## NOTAS

- 1 Presionar el control de pie no tiene efecto en los modos especiales.
- 2 Vea todos los modos especiales para volver a visualizar el modo de ajustes.
- 3 El texto **reset no (no restaurar)** se muestra por defecto.

# 10 Lista de errores y resolución de problemas

## 10.1 Advertencia de seguridad (en funcionamiento)

| Descripción de la advertencia                                 | Mensaje                      | Causa de la advertencia                                                                                                                                                                                                                                   | Acción                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recalentamiento del motor                                     |                              | Demanda excesiva de potencia del micromotor MX-i LED 3 <sup>rd</sup> Gen.                                                                                                                                                                                 | Evite un uso prolongado. Deje que se enfríe el sistema.                                                                                                                                                              |
| Deje de pisar el pedal [control de pie]                       |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se pisa el control de pie para acceder a los submodos de ajustes.</li> <li>Se pisa el control de pie durante el encendido del aparato.</li> <li>Se pisa el control de pie tras recuperarse de un error.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse la rueda para confirmar los ajustes.</li> <li>Deje de pisar el control de pie y píselo de nuevo.</li> <li>Deje de pisar el control de pie y píselo de nuevo.</li> </ul> |
| Transición de paso de baja velocidad a paso de alta velocidad | <br>El velocímetro parpadea. | El usuario cambia de frenado a baja velocidad a uno a alta velocidad ( $\geq 100$ rpm).                                                                                                                                                                   | No se requiere ninguna acción, la advertencia desaparece a los 2 segundos.                                                                                                                                           |
| Motor atascado                                                |                              | El motor se queda atascado durante más de 2 segundos. La alimentación del motor se ha cortado para evitar que se recaliente.                                                                                                                              | Deje de pisar el control de pie, libere el instrumento y pise el control de pie de nuevo.                                                                                                                            |
| Pedal [control de pie] desconectado                           |                              | El control de pie no está conectado al dispositivo.                                                                                                                                                                                                       | Conecte el control de pie al dispositivo.                                                                                                                                                                            |
| El motor no está conectado.                                   |                              | El motor no está conectado correctamente al aparato. La tornillería del motor está dañada.                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirme error.</li> <li>2. Conecte el cable del motor.</li> <li>3. Si el problema persiste, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.</li> </ol>                        |

## 10.2 Error de funcionamiento del aparato

| Descripción del error                                               | Origen del error                                                                                                       | Cuándo                  | Acción                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERROR 1                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cortocircuito del motor                                             | Fallo eléctrico: cortocircuito entre las fases del motor.                                                              | En modo funcionamiento. | Sustituya el cable y/o el motor.                                                                                                                                                                                                                             |
| ERROR 2                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Error del controlador principal                                     | El software ha detectado otro estado de error.                                                                         | En cualquier momento.   | 1. Apague el sistema.<br>2. Póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                                      |
| ERROR 3                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Error de tiempo de espera de comunicación del controlador del motor | Fallo del controlador DMX.<br>Fallo del controlador principal RS-232.                                                  | En modo funcionamiento. | 1. Apague el sistema.<br>2. Póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                                      |
| ERROR 4                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria EEPROM no válida                                            | Fallo de la memoria EEPROM.                                                                                            | En cualquier momento.   | Póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.<br>Reconocer este error permite al operador trabajar con normalidad, pero no permitirá que se guarden o se restauren los ajustes.<br>Este error aparecerá cada vez que se intente guardar o restaurar un ajuste. |
| ERROR 5                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura excesiva de accionamiento del motor                     | Sobrecarga del motor en un entorno de alta temperatura.<br>Fallo del controlador DMX.                                  | En cualquier momento.   | 1. Espere a que se enfríe el sistema.<br>2. Si el problema persiste, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                             |
| ERROR 6                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Error de subtensión del controlador del motor                       | Sobrecarga del motor en un entorno de alta temperatura.<br>Fallo de alimentación eléctrica.                            | En cualquier momento.   | 1. Confirme error.<br>2. Si el problema persiste, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                |
| ERROR 7                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Error de sobretensión del controlador del motor                     | Fallo de alimentación eléctrica.<br>La herramienta utilizada tiene demasiada inercia.                                  | En cualquier momento.   | 1. Confirme error.<br>2. Si el problema persiste, póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                |
| ERROR 8                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fallo general de la bomba de irrigación                             | Fallo eléctrico: cortocircuito a tierra o a alimentación.<br>Fallo eléctrico: cortocircuito entre las fases del motor. | En modo funcionamiento. | 1. Apague el sistema.<br>2. Póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                                      |
| ERROR 9                                                             |                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fallo en la rueda                                                   | Fallo eléctrico del codificador de la rueda.                                                                           | En cualquier momento.   | 1. Apague el sistema.<br>2. Póngase en contacto con Bien-Air Dental SA.                                                                                                                                                                                      |



FIG. 1

# 11 Mantenimiento

## ⚠ ATENCIÓN

Utilice únicamente productos de mantenimiento y piezas Bien-Air Dental originales o recomendados por Bien-Air Dental. El uso de otros productos o piezas puede provocar fallos de funcionamiento o la anulación de la garantía.

### 11.1 Revisión

## ⚠ ATENCIÓN

No desmonte nunca el aparato. Si necesita reparaciones o modificaciones, le recomendamos que acuda a su distribuidor habitual o directamente a Bien-Air Dental SA.

### Periodo de servicio

El dispositivo ha sido probado con la simulación de 10 000 procedimientos clínicos (que equivale a un periodo de servicio de entre 6 y 10 años). Si el uso real del dispositivo supera el periodo de servicio comprobado, se recomienda realizar mantenimiento preventivo.

#### Nota 1

### 11.2 Limpieza y desinfección

## ⚠ ATENCIÓN

- No lo sumerja en una solución desinfectante.
- No adecuado para baños ultrasónicos.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Utilice una línea de irrigación estéril nueva para cada paciente.
- Utilice una película de protección estéril nueva para cada paciente.

FIG. 1

## Limpieza

- A.** Retire la rueda (1) y lávela con agua dos veces, colocándola bajo el grifo (a unos 15-38 °C), siempre que el agua de grifo local tenga un pH de entre 6,5 y 8,5 y un volumen de cloruro inferior a 100 mg/l. Si el agua del grifo no cumple con estas indicaciones, utilice agua desmineralizada (desionizada).

#### Nota 2

- B.** Limpie el equipo, incluyendo el soporte, el control de pie y las superficies internas y externas de la rueda, frotando cuidadosamente con un trapo limpio humedecido con un producto adecuado (por ejemplo, Spraynet de Bien-Air Dental o alcohol isopropílico durante unos 15 segundos).

## Esterilización de la rueda

## ⚠ ATENCIÓN

Antes de usarla por primera vez, limpie y esterilice la rueda.

## ⚠ ATENCIÓN

La calidad de la esterilización depende en gran medida de la limpieza del instrumento. Esterilice únicamente productos perfectamente limpios.

## ⚠ ATENCIÓN

Esterilice únicamente según el proceso que se indica a continuación.

## Procedimiento

## ⚠ ATENCIÓN

Embale el dispositivo en un embalaje validado para la esterilización mediante vapor de agua.

## ⚠ ATENCIÓN

Use únicamente ciclos de eliminación dinámica del aire: ciclo de prevacío o de pulso de presión del vapor de purgación (SFPP, por sus siglas en inglés).

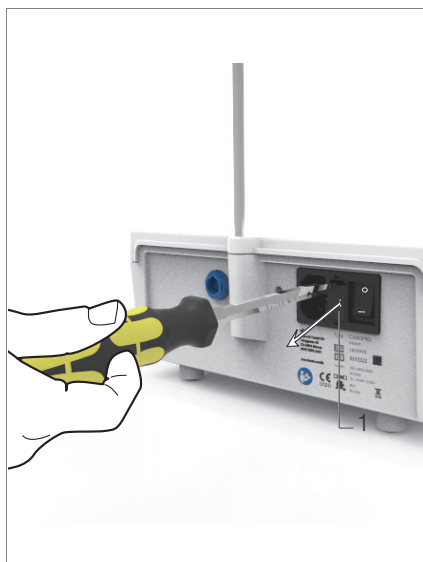


FIG. 2

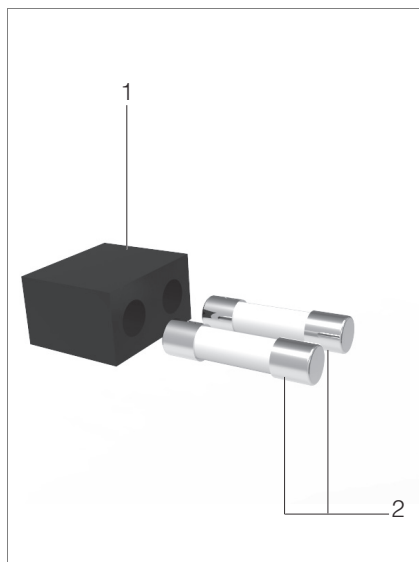


FIG. 3

Lleve a cabo una esterilización por vapor, siguiendo un ciclo dinámico de eliminación del aire, (ANSI/AAMI ST79, sección 2.19), es decir, eliminación del aire por evacuación forzada, (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) a 135 °C (275 °F) durante 3 minutos. En las jurisdicciones donde sea obligatoria la esterilización de priones, esterilice a 135 °C durante 18 minutos.

**Los parámetros recomendados para la esterilización son los siguientes:**

- La temperatura máxima en la cámara de autoclave no supera los 137 °C, es decir, la temperatura nominal del autoclave está configurada en 134 °C, 135 °C o 135,5 °C, teniendo en cuenta la imprecisión de la medición de temperatura del esterilizador.
- La duración máxima del intervalo a máxima temperatura (137 °C) cumple con los requisitos nacionales para la esterilización por calor húmedo y no supera los 30 minutos.
- La presión absoluta de la cámara del esterilizador está comprendida dentro del intervalo de 0,07 y 3,17 bar (de 1 a 46 psia).
- La tasa de cambio de temperatura no supera los 15 °C/min en el aumento de temperatura ni los -35 °C/min en el descenso de esta.
- La tasa de cambio de presión no sobrepasa los 0,45 bar/min (6,6 psia/min) en el aumento de presión ni los -1,7 bar/min (-25 psia/min) en el descenso de esta.
- No se agregan reactivos físicos ni químicos al vapor de agua.

## 11.3 Importante

Respecto al mantenimiento: ..... Consulte las instrucciones de uso  
 Micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen.....REF 2100245  
 Cable para micromotor .....REF 2100163  
 Contra-ángulo CA 20:1 L, luz .....REF 2100209  
 Contra-ángulo CA 20:1 L  
 Micro-Series, luz .....REF 2100209  
 Contra-ángulo CA 20:1 L KM, luz.....REF 2100209  
 Contra-ángulo CA 20:1 L KM  
 Micro-Series, luz .....REF 2100209  
 Pieza de mano recta 1:1.....REF 2100046

## 11.4 Sustitución de fusibles

- A. Apague el equipo Chiropro 3rd Gen.
- B. Desconecte el cable de red.

### ⚠ ATENCIÓN

El cable de alimentación se debe desconectar al menos 10 segundos antes de abrir la caja de fusibles.

FIG. 2

- C. Retire la caja de fusibles (1) con un destornillador plano.

FIG. 3

- D. Sustituya los fusibles (2) por los nuevos y coloque la caja de fusibles de nuevo (1) en su lugar.

### ⚠ ATENCIÓN

Utilice únicamente fusibles T4,0 Ah 250 V CA REF.1307312-010.

## NOTAS

- 1 Bien-Air Dental SA insta al usuario a que consulte las instrucciones de uso relevantes para la inspección de dispositivos dinámicos.
- 2 La rueda se mantiene sujeta magnéticamente. No es necesario conservar su posición angular al retirarla ni volver a ponerla en su sitio.

# 12 Términos de la garantía

Bien-Air Dental SA concede al usuario una garantía que cubre todos los defectos de funcionamiento, de material o de fabricación.

Esta garantía cubre el dispositivo a partir de la fecha de la factura durante:

- 12 meses en lo que respecta al cable del motor;
- 24 meses en lo que respecta al equipo Chiropro 3rd Gen y a CA 20:1 L Micro-Series;
- 36 meses para el micromotor MX-i LED 3<sup>rd</sup> Gen.

En caso de reclamación justificada, Bien-Air Dental SA o su representante autorizado cumplirán con las obligaciones de la empresa indicadas en esta garantía mediante la reparación o la sustitución gratuita del producto.

Queda excluida cualquier otra reclamación, independientemente de su naturaleza, en particular en forma de reclamación por daños y perjuicios.

Bien-Air Dental SA no se responsabiliza de los daños o roturas, ni de las consecuencias derivadas de los mismos, ocasionados por:

- desgaste excesivo;
- uso inadecuado;
- incumplimiento de las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento;
- influencias químicas, eléctricas o electrolíticas no habituales;
- conexiones de mala calidad, ya sea del suministro eléctrico, de aire o de agua.

La garantía no cubre los conductores de luz de tipo «fibra óptica» flexibles, así como ninguna pieza de material sintético.

La garantía perderá su validez si el daño y sus consecuencias se deben a una manipulación inadecuada del producto o si personas no autorizadas por Bien-Air Dental SA llevan a cabo modificaciones del producto.

Las reclamaciones conforme a los términos de la garantía se tendrán en consideración únicamente si, junto con el producto, se presenta la factura o la carta de porte, en la que deben indicarse con claridad la fecha de la compra, la referencia del producto y el n.º de serie.

Consulte los términos y las condiciones generales de venta en [www.bienair.com](http://www.bienair.com).

 **Bien-Air Dental SA**

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

[dental@bienair.com](mailto:dental@bienair.com)

Other addresses available at

**[www.bienair.com](http://www.bienair.com)**