



Filtek™

Bulk Fill
Fluido

El composite fluido para obturación en bloque más fácil de inyectar.

El composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido está disponible en una nueva jeringa ergonómica, diseñada para mejorar la comodidad y facilitar la inyección. Esto le proporciona mayor control y visibilidad para una aplicación precisa en restauraciones profundas.

Reducción de burbujas y desperdicios

Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material durante la dispensación, lo que proporciona un mayor control.

Adiós a la incertidumbre

El vástago verde de la jeringa indica el volumen de material restante. Cuando la jeringa esté vacía, solo será visible el émbolo blanco.



Cánula flexible

Se flexiona fácilmente sin torcerse para facilitar el acceso.

Fácil de manejar e inyectar

La placa para los dedos y el émbolo triangulares le permiten personalizar su agarre con facilidad y rapidez.



Ventajas clave

- Prácticamente sin burbujas ni extrusión excesiva de material
- La cánula se flexiona fácilmente para facilitar el acceso
- Diseño ergonómico que facilita el manejo y la inyección
- Aplicación inyectable en un solo paso en incrementos de hasta 4 mm
- Adaptación excelente y bajo estrés de contracción

Puede calentarse para la técnica de composite inyectado

Se puede calentar hasta 70 °C durante un periodo de hasta una hora, como máximo 25 veces.



Restauraciones simplificadas en el sector posterior



Prepare el diente y aplique un adhesivo, p. ej., adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal.



Dispense hasta 4 mm de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido en la cavidad preparada y polimerice, p. ej., con la lámpara de fotopolimerización LED 3M™ Elipar™ DeepCure-S.




Aplique una capa de 2mm de espesor (como mínimo) de un composite estético, por ejemplo 3M™ Filtek™ Universal Restorative, y polimerice.

Fotografías clínicas cortesía del Dr. Reich, Seefeld (Alemania)

Indicaciones

(Incrementos de hasta 4 mm)

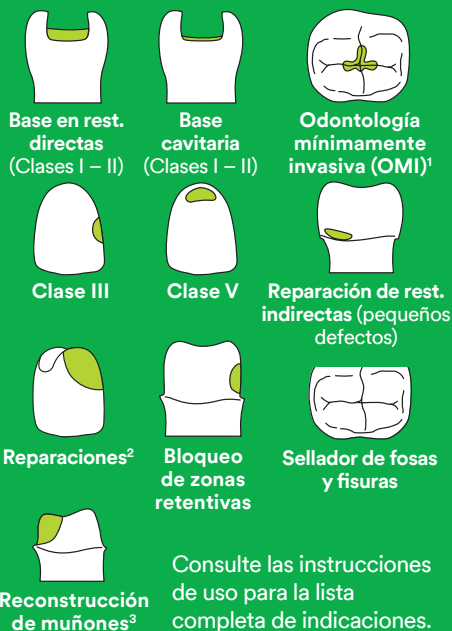

Información para pedidos



Reposiciones de composite 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido

Las reposiciones incluyen: 2 jeringas de 2 g; 20 puntas dispensadoras.

TONO	REF.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

REF.	INFORMACIÓN DE PRODUCTO
3740T	Puntas dispensadoras de 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fluido, (20 unidades)



3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

1. Incluidas pequeñas restauraciones oclusales no sometidas a carga.
2. Restauraciones en provisionales confeccionados con resina acrílica o bisacrilica.
3. En casos en los que aún este presente por lo menos la mitad de la estructura coronal del diente para proporcionar apoyo estructural para la corona.

3M, Elipar, Filtek y Scotchbond son marcas registradas de 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizado bajo licencia en Canadá. Por favor, recicle. Impreso en España. © 3M 2020. Reservados todos los derechos. 70-2013-7232-6