

COMPOSITE HÍBRIDO SUBMICRÓNICO UNIVERSAL

BRILLIANT EverGlow[®]

Luminosidad permanente – hecha brillante



NUEVOS TONOS



RESULTADOS BRILLANTES

Con el composite universal BRILLIANT EverGlow, se pueden conseguir sin esfuerzo restauraciones muy estéticas y de larga duración.

Se desarrolló centrándose específicamente en la estética y la facilidad de uso y destaca por su cómoda manipulación y por las excelentes propiedades de integración y el alto brillo de sus tonos.

BRILLIANT EverGlow es fácil de pulir. Gracias a su mayor resistencia a la abrasión y al aumento de la retención del brillo, ofrece unos excelentes resultados a largo plazo.

- Pulido excepcional y brillo duradero
- Restauraciones estéticas con una sola tonalidad
- Sistema de tonos versátil con tres niveles de translucidez
- Excelente modelado y consistencia suave
- Buena humectabilidad con adherencia mínima al instrumento




PULIDO EXCEPCIONAL Y BRILLO DURADERO

LA COMPOSICIÓN DEL RELLENO NO SE CENTRA EN EL BRILLO

Gracias a la composición submicrónica de su relleno, BRILLIANT EverGlow proporciona de forma inmediata una superficie increíblemente suave con un brillo satinado directamente después de la colocación del material. Esto simplifica el pulido y permite conseguir unas restauraciones altamente estéticas de modo casi inmediato. BRILLIANT EverGlow es uno de los composites con mejor conservación del brillo.


EVALUACIÓN DEL PULIDO¹

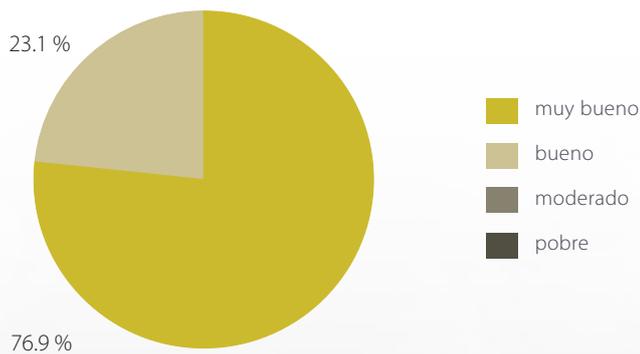

Los dentistas han confirmado una buena capacidad de pulido. En una entrevista realizada a 39 dentistas de Europa y los Estados Unidos, el **100 %** de los dentistas le dio una puntuación positiva. El 76,9 % le dio la máxima puntuación.

CONSERVACIÓN DEL BRILLO¹

Después de la exposición al simulador del cepillado dental, medido en unidades de brillo (UB)

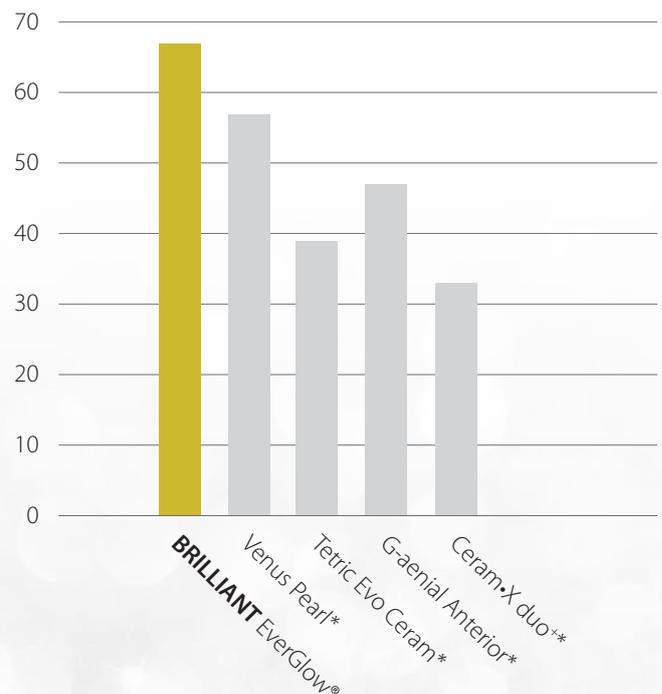

Incluso después de 20 000 movimientos en el simulador del cepillado dental, BRILLIANT EverGlow conserva un alto brillo.


¹ Fuente: datos internos | *no es una marca registrada de COLTENE

RESTAURACIONES ESTÉTICAS DE UNA SOLA TONALIDAD CON TONOS UNIVERSALES

COLTENE ES UN INNOVADOR EN ESTÉTICA DE COLORES

BRILLIANT EverGlow ofrece tonos universales con el probado sistema Duo Shade inventado por COLTENE. El sistema Duo Shades simplifica la gestión del color combinando dos tonalidades VITA* en una sola (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Esto es posible gracias a las propiedades ópticas de Duo Shades, que le permite integrarse armoniosamente con el diente adyacente.

* VITA no es una marca comercial de COLTÈNE

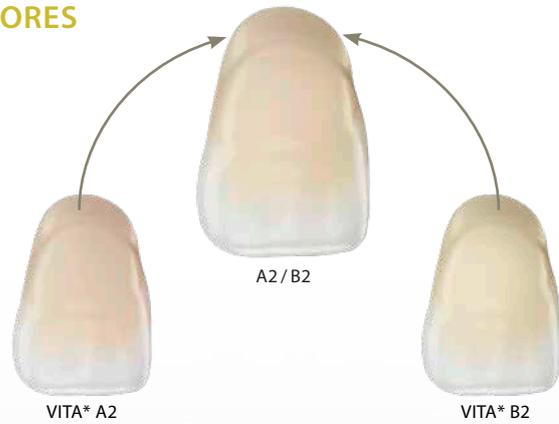

Caso clínico usando únicamente A3/D3

Situación inicial

Tratamiento

Tratamiento

Resultado final

LEA ESTE INFORME DE USUARIO DEL DR. MED. DENT. MARKUS LENHARD Y OTROS INFORMES DE USUARIO

everglow.coltene.com/lit/es

Para BRILLIANT EverGlow, el concepto Duo Shade se ha llevado un paso más adelante: los tonos universales. Mediante el uso de un único tono universal, se pueden conseguir restauraciones perfectas sin que sea necesario estratificar con un esmalte translúcido. Lograr unos grandes resultados estéticos nunca ha sido tan fácil.



RECOMENDACIONES PARA LA COMBINACIÓN DE TONOS



everglow.coltene.com/tips/es



7 TONOS UNIVERSALES

- Duo Shades basados en los tonos VITA*
- Para obturaciones en anteriores y posteriores
- Para restauraciones estéticas con una sola tonalidad
- Para sustituir la dentina en restauraciones de varias tonalidades

EL SISTEMA DE TONOS FLEXIBLE PARA LOS CASOS MÁS COMPLEJOS

Además de los tonos universales, hay disponibles otros ocho tonos complementarios para personalizar con la técnica de estratificación de tonos. De esta forma, se consigue un resultado armonioso incluso en los casos más complejos.

Los tonos translúcidos imitan las zonas del esmalte especialmente pronunciadas, mientras que los cinco tonos opacos simulan las bases de los dientes descoloridos o los teñidos por amalgama.

MÁS FÁCIL PARA EL DÍA A DÍA EN LA CLÍNICA



Restauraciones anteriores
con un solo tono



Restauraciones posteriores
con un solo tono



Tono opaco + tono universal

PROFESIONAL PARA LOS CASOS MÁS COMPLEJOS








Tono universal + capa superficial
translúcida



Tono opaco + tono universal



Tono opaco + tono universal
+ capa superficial translúcida

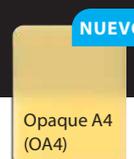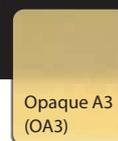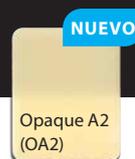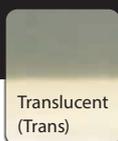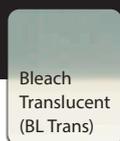

2 TONOS TRANSLÚCIDOS

- Para la caracterización individual de zonas del esmalte particularmente translúcidas

5 TONOS OPACOS

- Para enmascarar desviaciones cromáticas y tinciones por amalgama

EXCELENTE MODELADO Y CONSISTENCIA SUAVE

«BRILLIANT EverGlow es uno de mis composites preferidos. Es fácil de usar, fácil de manipular y siempre permite conseguir un excelente pulido».


Dr. Monik Vasant
BChD MFGDP MSc



Su consistencia suave y su estabilidad dimensional hacen que el material de obturación avanzado BRILLIANT EverGlow sea fácil y cómodo de aplicar en las cavidades. Las cúspides cuidadosamente modeladas, los bordes y los puntos de contacto permanecen intactos y no se deforman. Alta resistencia a la luz de operación y baja pegajosidad, además de una buena humectabilidad, ponen la guinda a su comodidad de uso.

ADHERENCIA AL INSTRUMENTO ¹

Medido en Newtons

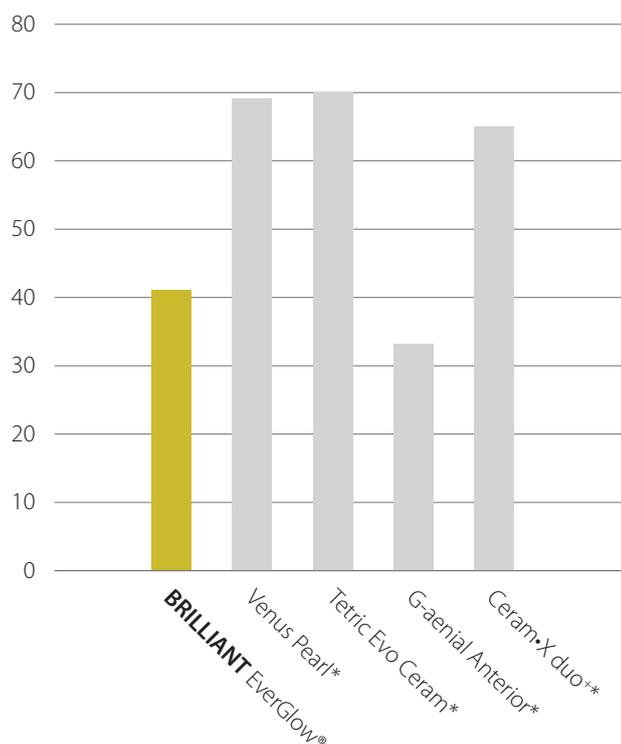


La suave consistencia y la excelente humectabilidad de BRILLIANT EverGlow hacen que el material sea perfecto para la cementación de restauraciones indirectas como BRILLIANT COMPONEER, el sistema de carillas de composite directas de COLTENE.



Sistema de carillas directas de composite BRILLIANT COMPONEER

Gracias a su excelente humectabilidad, BRILLIANT EverGlow ofrece una unión excelente a las superficies dentales con adhesivo sin pegarse al instrumento. Esto también lo ha confirmado una encuesta internacional realizada entre los evaluadores. Más del 90 % de los participantes valoraron la humectabilidad como «muy buena» o «buena».

HUMECTABILIDAD SOBRE EL ADHESIVO ¹

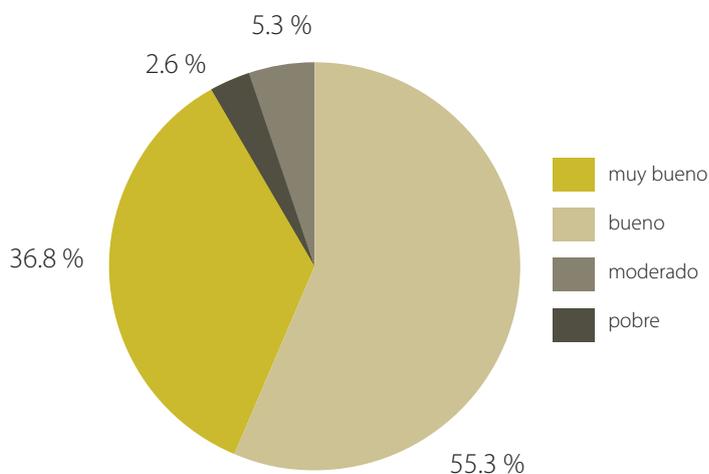

LA CLAVE PARA UNAS RESTAURACIONES BRILLANTES



DESCARGAR GUÍA DEL PRODUCTO




everglow.coltene.com/guide/es

TECNOLOGÍA DE RELLENO DE BRILLIANT EVERGLOW

La tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow se ha diseñado para proporcionar la combinación perfecta de estética duradera, comodidad en la manipulación y resistencia mecánica. El relleno de vidrio submicrónico permite un excelente pulido y una gran conservación del brillo. Los demás rellenos prepolimerizados, que tienen la misma composición que el composite sin fraguar, disminuyen la reducción del volumen y mejoran las propiedades de modelado del composite. Las superficies del relleno reciben un tratamiento especial para garantizar la resistencia del compuesto dentro de la matriz de la resina. Estas características aportan las condiciones previas idóneas para conseguir el excelente pulido y la gran conservación del brillo de BRILLIANT EverGlow. El resultado es un composite de última generación que permite lograr unas restauraciones «brillantes».

SENCILLAMENTE IMPRESIONANTE

Imagen SEM de BRILLIANT EverGlow

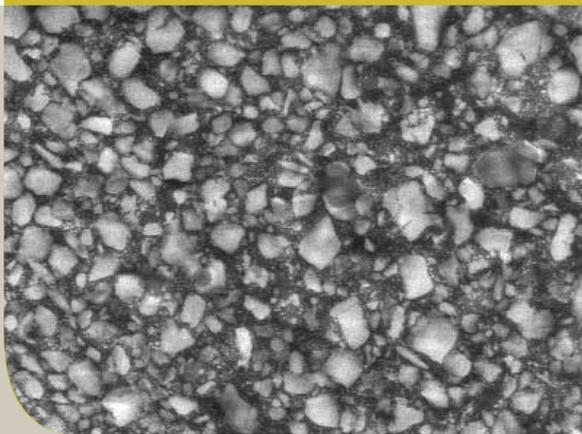


COLECCIÓN DE ESTUDIOS Y MÁS

Descubra más sobre los datos técnicos y los resultados de las mediciones comparados con los de la competencia en la guía de productos.


ABRASIÓN MÍNIMA¹

Comparado con otros composites convencionales, los valores de abrasión de BRILLIANT EverGlow son significativamente inferiores.

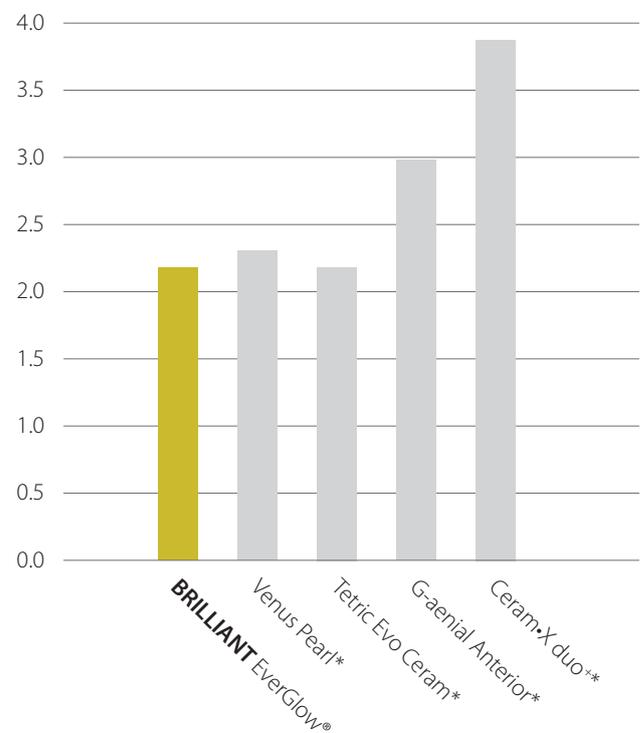

ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Ideal para las restauraciones de los dientes posteriores por su alta resistencia a las fuerzas masticatorias.

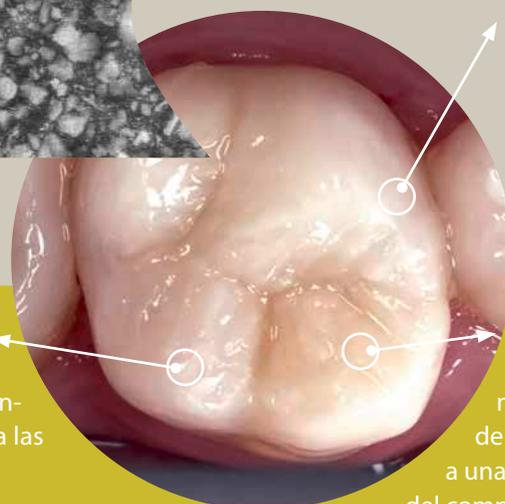

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA

La composición optimizada del monómero hace que la absorción de agua sea baja, lo que contribuye a una excelente estabilidad del color del composite a largo plazo.

¹ Fuente: datos internos | *no es una marca registrada de COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW FLOW

EL COMPLEMENTO IDEAL

BRILLIANT EverGlow Flow es un composite híbrido submicrónico disponible también en consistencia fluida. Aparte de las propiedades estéticas del material, se dedicó especial atención a que las propiedades de manipulación fueran óptimas.



«Fluye, pero no gotea».

Dr. med. dent. Christoph G. Hüsken, Suiza

MUY ESTABLE Y A LA VEZ MUY FLUIDO

Con BRILLIANT EverGlow Flow, una excelente estabilidad y una buena fluidez ya no son una contradicción. BRILLIANT EverGlow Flow consigue combinar estas propiedades en un único material que lo hace extremadamente versátil.

Con su gran estabilidad y sus perfectas propiedades tixotrópicas, BRILLIANT EverGlow Flow se puede aplicar con absoluta precisión de manera fácil y controlada.

«La tixotropía es perfecta, lo cual es muy importante. Excelente aplicación sin manchas ni goteos. El material se puede mover hasta el lugar adecuado y se queda en su sitio lo suficiente como para tener tiempo de aplicar la luz de polimerización».

Dr. med. dent. Ralph Schönemann, Alemania



Estabilidad inicial




Mientras que el comportamiento de fluidez controlada facilita el trabajo sin distracciones, la baja viscosidad del material ofrece una buena humectación que, por ejemplo,

es importante en el caso del relleno de cavidades y de las obturaciones pequeñas.



PUNTAS DE APLICACIÓN EN DOS TAMAÑOS PARA MÚLTIPLES INDICACIONES

Todas las jeringas de BRILLIANT EverGlow Flow están disponibles con puntas de aplicación de dos tamaños. Además del tamaño estándar con un diámetro interior de 0,8 mm, en los accesorios incluidos se ha añadido un tamaño fino. Con un diámetro interior de apenas 0,4 mm, permite la máxima precisión de aplicación.

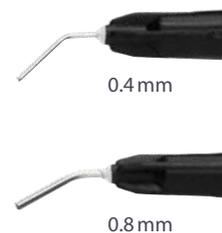

CONCEPTO DE TONO FUNCIONAL QUE INCLUYE UNA TONALIDAD OPACA



BRILLIANT EverGlow Flow tiene todas las características de calidad de la tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow, como la capacidad de pulido y la conservación del brillo. También cuenta con la misma gama de tonos y ofrece la tecnología Duo Shades y tres niveles de translucidez.

Aunque los tonos universales y translúcidos cubren casi todos los casos, las áreas más oscuras y las desviaciones cromáticas pueden interferir en el resultado estético final de una restauración y es posible que necesiten una capa opaca. Los tonos opacos OA2 y OA3 se desarrollaron para satisfacer esta necesidad creando la base de una restauración estética con un tono armonioso.

Como resultado, BRILLIANT EverGlow Flow ofrece resultados estéticos convincentes y es la pareja perfecta del composite universal BRILLIANT EverGlow.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

KITS

	Tonos universales**							Tonos translúcidos**	
	Bleach (BL)	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	C2/C3	A4/C4	Bleach Translucent (BL Trans)	Translucent (Trans)
Kits de un solo tono*									
60024151 7 jeringas de 3 g	1	1	1	1	1	1	1		
60024152 70 tips de 0,2 g	10	10	10	10	10	10	10		
Kits Extention*									
60024156 7 jeringas de 3 g								1	1
60024157 70 tips de 0,2 g								10	10
Kit Flow									
60019760 4 jeringas de 2 g		1	1	1	1				

** Para restauraciones con un solo tono o para estratificación de tonos. Encontrará más información en la página 4.

*** Tonos complementarios para combinar con tonos universales en la técnica de estratificación de tonos. Encontrará más información en la página 5.

REPOSICIONES

Jeringas

1 x 3 g

Tips

20 x 0,2 g

60019697	60019706	● Bleach (BL)
60019698	60019707	● A1/B1
60019699	60019708	● A2/B2
60019700	60019709	● A3/D3
60019701	60019710	● A3.5/B3
60019702	60019716	● C2/C3
60019703	60019717	● A4/C4
60019705	60019719	● Bleach Translucent (BL Trans)
60019704	60019718	● Translucent (Trans)
60019743	60019746	● Opaque Bleach (OBL)
60019744	60019747	● Opaque A1 (OA1)
60023819	60023823	● Opaque A2 (OA2)*
60019745	60019748	● Opaque A3 (OA3)
60023820	60023824	● Opaque A4 (OA4)*

PAQUETES ECO

Jeringas

5 x 3 g

Tips

60 x 0,2 g

60024166	60024160	● A1/B1
60024167	60024161	● A2/B2
60024168	60024162	● A3/D3
60024169	60024163	● A3.5/B3



60019709 60019748



60019700

60023819

FLOW Jeringas

1 de 2 g + 10 puntas de aplicación

60019752	● Bleach (BL)
60019753	● A1/B1
60019754	● A2/B2
60019755	● A3/D3
60019756	● A3.5/B3
60019757	● A4/C4
60019758	● Translucent (Trans)
60019751	● Opaque A2 (OA2)
60023825	● Opaque A3 (OA3)*



60019753

Flow

Tonos opacos**					Accesorios					
					Guía de color		Tip dispensador	Mini Bloc de papel	Agujas de aplicación	
Opaque Bleach (OBL)	Opaque A1 (OA1)	Opaque A2 (OA2)	Opaque A3 (OA3)	Opaque A4 (OA4)	Universal	Extention			Estándar Ø 0,8 mm	Fino Ø 0,4 mm
					1				2	
					1		1		2	
1	1	1	1	1		1			2	
10	10	10	10	10		1	1		2	
									1	20
										20

ACCESORIOS

- 60024158** Guía de color de tonos Universal
- 60024159** Guía de tonos Extention con tonos Translucent + Opaque
- 60022485** Dispensador de composite en tip
- 8469** 20 puntas de aplicación para fluido estándar de Ø 0,8 mm
- 60022137** 20 puntas de aplicación para fluido finas de Ø 0,4 mm



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adhesivo monocomponente fotopolimerizable para cementación adhesiva con la técnica de autograbado, grabado total o grabado selectivo.

60019538 Introkit

BRILLIANT COMPONEER

Carillas de composite prefabricadas para restauración de los dientes anteriores. Las carillas basadas en la tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow están disponibles en los tonos Translucent y Bleach Translucent.

60023214 Introkit de jeringas
60023215 Introkit de tips

DIATECH ShapeGuard

Pulidor de silicona para el prepulido (púrpura) y el pulido de alto brillo (azul) de restauraciones de composite. Gracias a sus láminas flexibles, DIATECH ShapeGuard se adapta a la estructura de la superficie.

60019916 Kit de pulido de composite Plus



60023214



«COLTENE BRILLIANT EverGlow me dejó muy impresionado. No se pega a los instrumentos y obedece a los movimientos de empaquetado del usuario. Estas dos características garantizan que se adapte a la forma de la cavidad de forma fiable. Además, su estética es asombrosa. No requiere un protocolo de acabado complejo y se consigue un resultado brillante natural y suave. Su adaptación al color del diente es excelente y lo recomiendo encarecidamente a todos los dentistas».

Dr. Nalin Karunaratne, Reino Unido



«Como líder de opinión de muchas empresas dentales, he tenido la ocasión de trabajar y probar diversos composites.

Con BRILLIANT EverGlow, fue un "amor a primera vista". Resulta muy sencillo igualar el color y ocultar las preparaciones marginales a pesar del uso de un número reducido de tonos y conseguir unos resultados predecibles y de alta calidad día a día, tanto desde el punto de vista estético como clínico».

Dr. Monaldo Saracinelli, grupo Style Italiano, Italia



ENLACE AL VÍDEO DEL PRODUCTO THE BRILLIANT EVER-GLOW

everglow.coltene.com/mov/es



ENLACE A INFORMES DE USUARIOS

everglow.coltene.com/lit/es



ENLACE A MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA

everglow.coltene.com/guide/es

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming,
3 - Bajo A, 28220 Majadahonda,
Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Suiza
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / EE. UU.
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**