

· Conscious dentistry ·

VIDU

STONE GYPSUM Type III

es · Yeso piedra Tipo III
it · Gesso di pietra Tipo III
fr · Plâtre pierre Type III
pt · Gesso pedra Tipo III
de · Hartgips Typ III

“THE FUTURE
IS IN YOUR HANDS”

VIDU

STONE GYPSUM Type III

en

INSTRUCTIONS FOR USE

Description

Hard type 3 extra fine stone for antagonist models, master models with complete and partial removable prostheses, metal frameworks, study and preliminary models.

Color: yellow.

Technical specifications

Setting time: 7 min.

Setting expansion: 0,09%

Compressive strength: 66 mpa - 9.565 psi - 670 kg/cm2

Rockwell hardness: 70 hrl.


Application



25 ml. + 100 g.



20"

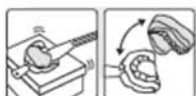

3' min. 30"

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all VIDU plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

Storage

Seal the container after use.

Minimum shelf life

3 years

Do not use after the expiry date.

Packaging

REF] VI56003 STONE GYPSUM Type III – 6 Kg

VIDU

YESO PIEDRA Tipo III

es

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

Escayola dura tipo 3 extrafina para modelos antagonistas, modelos maestros con prótesis removibles completas y parciales, estructuras metálicas, modelos de estudio y preliminares.

Color: amarillo.

Especificaciones técnicas

Tiempo de fraguado: 7 min.

Expansión de fraguado: 0,09%

Resistencia a la compresión: 66 mpa - 9.565 psi - 670

kg/cm2

Dureza Rockwell: 70hrl.

Aplicación



25 ml. + 100 g.



20"



3' min. 30"

Mediciones realizadas con agua desionizada a 23 °C. Con "Time Out" (regulador del tiempo de trabajo para todos los yesos/escayolas VIDU) se puede aumentar el tiempo de vertido según la técnica preferida.

Almacenamiento

Selle el envase después de su uso.

Vida útil mínima

3 años

No usar después de la fecha de caducidad.

Embalaje

REF] VI56003 YESO PIEDRA Tipo III – 6 Kg



ECO
DESIGN



CLOSE
MANUFACTURE



RESPONSIBLE
CONSUMPTION



SMART
WASTE



ONLINE
DISTRIBUTION

LASCOD S.P.A.
Via L. Longo 18, 50019 Sesto Fiorentina,
Florence, Italy
MADE IN ITALY

Dentared Odontology Services SL
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco

2022-REV-001



MODE D'EMPLOI

Description

Plâtre dur extra-fin de type 3 pour modèles antagonistes, maîtres-modèles avec prothèses complètes et partielles amovibles, armatures métalliques, modèles d'étude et préliminaires.

Couleur : jaune.

Spécifications techniques

Temps de prise : 7 min.

Mise en place de l'expansion : 0,09%



Résistance à la compression : 66 MPa - 9.565 Psi - 670

Kg/cm²

Dureté Rockwell : 70hrl.

Application

25 ml. + 100 g.

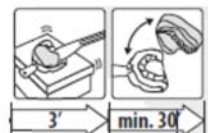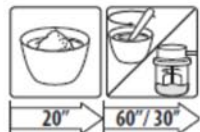

Mesures effectuées avec de l'eau désionisée à 23 °C. Avec "Time Out" (régulateur de temps de travail pour tous les gypses/plâtres VIDU), le temps de coulée peut être augmenté selon la technique préférée.

Stockage

Fermez le récipient après utilisation.

Durée de vie minimale

3 ans

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Emballage

REF V156003 PIERRE DE GYPSE Type III - 6 Kg

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione

Gesso duro extrafine tipo 3 per modelli antagonisti, modelli master con protesi rimovibili complete e parziali, strutture metalliche, modelli da studio e preliminari.

Colore: giallo

Specifiche tecniche

Tempo di regolazione: 7 min.

Espansione dell'impostazione : 0,09%

Resistenza alla compressione: 66 mpa - 9.565 psi - 670

kg/cm²

Durezza Rockwell: 70hrl.

Applicazione

25 ml. + 100 g.



Misure effettuate con acqua deionizzata a 23 °C. Con "Time Out" (regolatore del tempo di lavoro per tutti gli intonaci VIDU) è possibile aumentare il tempo di colata in base alla tecnica preferita.

Deposito

Sigillare il contenitore dopo l'uso.

Durata minima di vita

3 anni

Non usare dopo la data di scadenza.

Imballaggio

REF V156003 GESSO DI PIETRA Tipo III - 6 Kg

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Descrição

Gesso tipo 3 extra-fino para modelos antagonistas, modelos principais com próteses totais e parciais removíveis, estruturas metálicas, modelos de estudo e modelos preliminares.

Cor: amarelo.

Especificações técnicas

Tempo de definição: 7 min.



Expansão do fraguado: 0,09%

Força compressiva: 66 mpa - 9.565 psi - 670 kg/cm²

Dureza Rockwell: 70hrl.

Aplicação

25 ml. + 100 g.

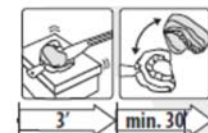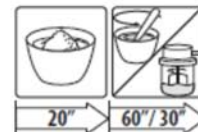

Medições feitas com água desionizada a 23 °C. Com "Time Out" (regulador de tempo de trabalho para todos os gessos VIDU) o tempo de despejo pode ser aumentado de acordo com a técnica preferida.

Armazenamento

Selar o recipiente após a sua utilização.

Vida útil mínima

3 anos

Não utilizar após a data de expiração.

Embalagem

REF V156003 GESSO PEDRA Tipo III - 6 Kg