



**Ivory®: clamps, diques de goma y accesorios**

Sistema completo de aislamiento

Salud oral en buenas manos



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Clamps Ivory® de Kulzer

Fabricados en **acero inoxidable**, diferentes tamaños y formas para la perfecta adaptación a la anatomía dental. Tensamos a mano meticulosamente cada clamp en fábrica para asegurar el **mejor rendimiento**.

A continuación, encontrará el listado completo de clamps Ivory disponibles y una breve descripción de los usos más habituales.

### Clamps más usados

#### PREMOLARES – CON ALAS

- 00 Anterior inferior pequeño
- 0 Cuello pequeño largo
- 1 Uso general, superior
- 2 Uso general, inferior
- 2A Premolar de cuello grande

#### PREMOLARES – SIN ALAS

- W2 Uso general, inferior
- W2A Premolar de cuello grande

#### MOLAR – CON ALAS

- 3 Pequeño inferior
- 4 Pequeño superior, dientes redondos
- 7 Uso general, inferior
- 8 Uso general, superior
- 8A Raíces de molares anteriores y posteriores
- 12A Derecha, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
- 13A Izquierda, dientes parcialmente erupcionados, 3er molar
- 14 Parcialmente erupcionados, el clamp más popular

#### MOLAR – CON ALAS (CONTINUACIÓN)

- 14A Parcialmente erupcionados, grande
- 56 Para todos los molares grandes

#### MOLAR – SIN ALAS

- W3 Pequeño inferior
- W8A Raíces de molares anteriores y posteriores
- W14A Parcialmente erupcionados, grande

### Clamps especiales

#### PREMOLARES – CON ALAS

- 1A Clamp para raíces

#### PREMOLARES – SIN ALAS

- W0 Cuello pequeño largo
- W1 Uso general, superiores
- 27N Universal

#### MOLAR – CON ALAS

- 5 Superior grande
- 7A Inferior grande
- 10 Derecha, corona corta pequeña

#### MOLAR – CON ALAS (CONTINUACIÓN)

- 11 Izquierda, corona corta pequeña
- 26 Molar inferior pequeño
- 27 Cavidades distales, molar grande

#### MOLAR – SIN ALAS

- W4 Superior pequeño
- W5 Superior grande
- W7 Uso general inferior, diente cuadrado
- W8 Uso general superior, diente redondo
- W14 Parcialmente erupcionado

#### MOLAR – SIN ALAS (CONTINUACIÓN)

- W56 Molar grande
- 26N Superior universal
- 28N Uso general, molar inferior

#### LABIAL – CON ALAS

- 6 Central e incisivo
- 9 Preparaciones labiales, todos los anteriores

### Labial

6



Para cavidades labiales en centrales y caninos.  
Para segundos premolares y segundos molares superiores.

9<sup>T</sup>




Para cavidades labiales en dientes anteriores.

## Diagrama dental

### Diente Clamp

<b>1</b>	4, 5, 8, 8A, 12A, 14, 26N
<b>2</b>	4, 5, 8, 8A, 12A, 14, 26N
<b>3</b>	4, 5, 8, 8A, 12A, 14, 14A, 26N, 56
<b>4</b>	0, 1, 1A, 2A, 27N
<b>5</b>	0, 1, 1A, 2A, 27N
<b>6</b>	6, 9
<b>7</b>	6, 9
<b>8</b>	6, 9
<b>9</b>	6, 9
<b>10</b>	6, 9
<b>11</b>	6, 9
<b>12</b>	0, 1, 1A, 2A, 27N
<b>13</b>	0, 1, 1A, 2A, 27N
<b>14</b>	4, 5, 8, 8A, 13A, 14, 14A, 26N
<b>15</b>	4, 5, 8, 8A, 13A, 14, 14A, 26N
<b>16</b>	4, 5, 8, 8A, 12A, 14, W14, 14A, 26N, 56

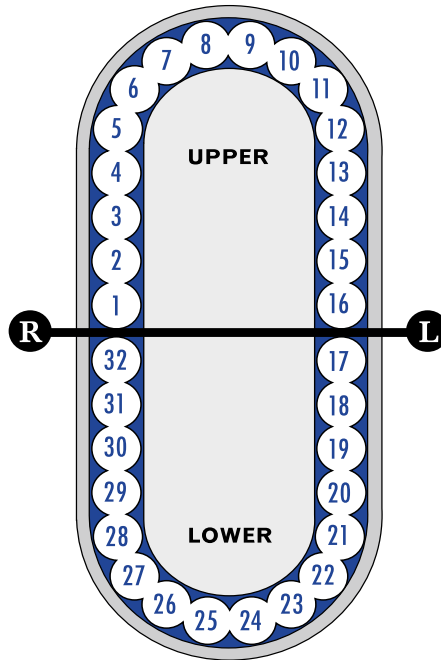

### Diente Clamp

<b>17</b>	3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56
<b>18</b>	3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56
<b>19</b>	3, 7, 7A, 8A, 12A, 14, 14A, 27, 56
<b>20</b>	0, 1A, 2, 2A, 6, 27N
<b>21</b>	0, 1A, 2, 2A, 6, 27N
<b>22</b>	00, 6, 9
<b>23</b>	00, 6, 9
<b>24</b>	00, 6, 9
<b>25</b>	00, 6, 9
<b>26</b>	00, 6, 9
<b>27</b>	00, 6, 9
<b>28</b>	0, 1A, 2, 2A, 6, 27N
<b>29</b>	0, 1A, 2, 2A, 6, 27N
<b>30</b>	3, 7, 7A, 8A, 12, 12A, 14, 14A, 27, 56
<b>31</b>	3, 7, 7A, 8A, 12, 12A, 14, 14A, 27, 56
<b>32</b>	3, 7, 7A, 8A, 14, 14A, 27, 56

## Premolar

**0°**



Para dientes largos o con cuellos pequeños. Arco alto, abrazaderas pequeñas.  
También disponible sin alas - W0

**00**



Para anteriores, inferiores pequeños y dientes en posición irregular. Arco alto, abrazaderas reducidas.

**1°T**



Uso general superior. Abrazaderas de acuerdo con la curvatura de la línea de encía.  
También disponible sin alas - W1

**1A**



Clamp para raíces. Abrazaderas dobladas hacia abajo para agarrar la raíz de premolares, anteriores.

**2°T**



Uso general inferior. Igual que #1 pero con abrazaderas planas para no afectar al tejido.  
También disponible sin alas - W2

**2A°T**



Para premolares con cuellos grandes. Abrazadera amplia.  
También disponible sin alas - W2A

**27N\***



Clamp universal para premolares. Abrazaderas de acuerdo con la curvatura de la línea de encía.  
Solo disponible sin alas

- \* Solo disponible sin alas
- También disponible sin alas
- T También disponible con abrazaderas dentadas (clamp Tiger)
- A Un poco más grande
- N Sin alas

## Clamps Tiger

1T Premolares, uso general en superiores	9T Anterior labial
2T Premolares, uso general en inferiores	14T Molar, parc. erupcionado
2AT Premolar, cuello grande	14DT Molar, acceso distal, dentado
	56T Para molares grandes

## Accesorios

IVORY® RUBBER DAM - VERDE O AZUL, 5X5 O 6X6  
 IVORY® RUBBER DAM PLANTILLA  
 IVORY® RUBBER DAM ARCO  
 IVORY® RUBBER DAM PORTACLAMP

IVORY® RUBBER DAM PERFORADOR  
 IVORY® RUBBER DAM KIT INCIO  
 IVORY® RUBBER DAM KIT COMPLETO

## Molar

3°



Para inferiores pequeños. Abrazaderas planas y reducidas para no afectar al tejido. **También disponible sin alas - W3**

4°



Para anteriores superiores. Abrazaderas reducidas para ajustar en cuellos de dientes redondos. **También disponible sin alas - W4**

5°



Para superiores grandes. Abrazaderas de acuerdo a la curvatura de la línea de encía. **También disponible sin alas - W5**

7°



Uso general en inferiores. Arco y abrazaderas medianas. Abrazaderas planas. Dientes que tienden a ser cuadrados. **También disponible sin alas - W7**

7A



Para inferiores grandes. Igual que #7 pero más grande. Arco grande, abrazaderas amplias.

8°



Uso general, anteriores. Para anteriores redondos. Abrazadera según la curvatura de la línea de encía para evitar rotación. **También disponible sin alas - W8**

8A°



Para raíces de molares superiores e inferiores. Abrazaderas de 4 puntos que agarran la raíz en las esquinas y colocan el dique subgingivalmente. **También disponible con alas- W8A**

10



Para molares pequeños con corona corta. Abrazadera bucal más amplia que la lingual. (10=derecha; 11=izquierda)

11



Para molares pequeños con corona corta. Abrazadera bucal más amplia que la lingual. (10=right; 11=left)

12A



Para todos los inferiores, particularmente terceros molares y dientes erupcionados. Solo disponible con abrazaderas dentadas. (12A= derecha; 13A= izquierda)

13A



Para todos los inferiores, particularmente terceros molares y dientes parcialmente erupcionados. (12A= derecha; 13A= izquierda).

14°<sup>T</sup>



Para dientes redondos parcialmente erupcionados, de tamaño inferior al normal o para dientes inclinados desde la línea de las encías. Arco pequeño. **También disponible sin alas - W14**

14A°



Igual que #14, pero más grande en todos los sentidos. **También disponible sin alas - W14A**

26



Para molares inferiores pequeños.

26N\*



Universal para superiores con abrazaderas festoneadas. **Disponible solo sin alas**

27



Para cavidades distales grandes.

28N\*



Uso general en inferiores. **Solo disponible sin alas**

56°<sup>T</sup>



Para todos los molares grandes. **También disponible sin alas - W56**

## IVORY® Diques de goma

Fabricados de látex natural, lavado a fondo en la etapa de fabricación para reducir las proteínas de la superficie. Resistencia al desgarro extremadamente alta, reduce las roturas durante la colocación. Los diques son finos y flexibles, permitiendo una fácil colocación en áreas especialmente difíciles. Color azul o verde para una mayor visibilidad, elevado contraste. Disponible en espesor medio, 15 x 15 cm.



## IVORY® Perforador

Instrumento de precisión fabricado en **acero inoxidable** de alta calidad. El exclusivo émbolo flotante golpea todos los bordes del disco de corte de manera uniforme, garantizando siempre un agujero perfecto y resistente al desgarro. El disco de corte gira a través de 6 tamaños de agujeros diferentes, proporcionando una apertura correcta tanto para los dientes anteriores más pequeños hasta los molares más grande.

## IVORY® Portaclamps

Los portaclamps Ivory están fabricados en **acero inoxidable** de alta calidad, asegurándole muchos años de uso. Las tenazas llegan a las abrazaderas de cualquier clamp sin doblarse, esto es especialmente importante cuando se invierte un clamp. El diseño de cabeza recta permite sujetar y colocar fácilmente cualquier tamaño de clamp.

## IVORY® Kits

El **Ivory Clamp Starter Kit** está compuesto por los clamps más utilizados. Se trata de clamps de uso general para la mayoría de las situaciones: n° 0, 2, 2A, 7, 8A, 9, 14, 14<sup>a</sup>.

El **Rubber Dam Complete Kit** incluye todos los elementos necesarios para la colocación del dique de goma: 1 perforador Ivory, 1 portaclamps Ivory, 1 arco portadique Ivory, 1 caja de 36un de diques azules Ivory 15x15cm, 1 plantilla para la correcta perforación, 8 clamps Ivory: n° 0, 2, 2A, 7, 8A, 9, 14, 14<sup>a</sup>.



**IVORY® Clamps de acero inoxidable****Clamps Premolares con Alas**

50057302	Stainless Steel Clamp No. 00
50057304	Stainless Steel Clamp No. 0
50057306	Stainless Steel Clamp No. 1
50057310	Stainless Steel Clamp No. 2
50057312	Stainless Steel Clamp No. 2A
50057322	Stainless Steel Clamp No. 3
50057324	Stainless Steel Clamp No. 4
50057328	Stainless Steel Clamp No. 7
50057334	Stainless Steel Clamp No. 8
50057336	Stainless Steel Clamp No. 8A
50057348	Stainless Steel Clamp No. 12A
50057352	Stainless Steel Clamp No. 13A
50057354	Stainless Steel Clamp No. 14
50057356	Stainless Steel Clamp No. 14A
50057374	Stainless Steel Clamp No. 56

**Clamps Premolares sin Alas**

50057510	Stainless Steel Clamp No. W2
50057512	Stainless Steel Clamp No. W2A
50057522	Stainless Steel Clamp No. W3
50057536	Stainless Steel Clamp No. W8A
50057556	Stainless Steel Clamp No. W14A

**Kits y Accesorios****Kits**

50057966	Complete Rubber Dam Kit: 1 perforador, 1 portaclamps, 1 arco, 1 caja de diques azules 15x15cm, 1 plantilla, 8 clamps: n° 0, 2, 2A, 7, 8A, 9, 14, 14ª
50057968	Rubber Dam Clamp Starter Kit: contiene 8 clamps: n° 0, 2, 2A, 7, 8A, 9, 14, 14ª

**Accesorios**

50057220	Rubber Dam Portaclamps
50057225	Rubber Dam Perforador

**Arcos Rubber Dam**

50057230	Adult Frame (6 in)
50057229	Pedo. Frame (5 in)

**Plantilla Rubber Dam**

50057235	Template 6" x 6"
----------	------------------

**IVORY® Clamps de acero inoxidable****Clamps con Alas**

50057308	Stainless Steel Clamp No. 1A
50057326	Stainless Steel Clamp No. 5
50057330	Stainless Steel Clamp No. 7A
50057338	Stainless Steel Clamp No. 10
50057342	Stainless Steel Clamp No. 11
50057370	Stainless Steel Clamp No. 26
50057372	Stainless Steel Clamp No. 27

**Clamps sin Alas**

50057504	Stainless Steel Clamp No. W0
50057506	Stainless Steel Clamp No. W1
50057524	Stainless Steel Clamp No. W4
50057526	Stainless Steel Clamp No. W5
50057528	Stainless Steel Clamp No. W7
50057534	Stainless Steel Clamp No. W8
50057554	Stainless Steel Clamp No. W14
50057728	Stainless Steel Clamp No. 26N
50057730	Stainless Steel Clamp No. 27N
50057732	Stainless Steel Clamp No. 28N
50057568	Stainless Steel Clamp No. W56

**IVORY® Clamps Anteriores**

50057382	Stainless Steel Clamp No. 6
50057384	Stainless Steel Clamp No. 9

**IVORY® Clamps Tiger**

50057841	Stainless Steel Clamp No. 1T
50057843	Stainless Steel Clamp No. 2T
50057847	Stainless Steel Clamp No. 2AT
50057849	Stainless Steel Clamp No. 14T
50057857	Stainless Steel Clamp No. 14DT
50057853	Stainless Steel Clamp No. 56T
50057855	Stainless Steel Clamp No. 9T

**IVORY® Premium Rubber Dam (diques de goma)**

40000269	Blue 5" x 5" (52 Sheets)
40000266	Blue 6" x 6" (36 Sheets)
40000279	Green 5" x 5" (52 Sheets)
40000281	Green 6" x 6" (36 Sheets)

Kulzer Iberia  
 Marie Curie 19, bajo – ofic. 5  
 28521 Rivas Vaciamadrid  
 (Madrid)  
[infodental-es@kulzer-dental.com](mailto:infodental-es@kulzer-dental.com)