

· Conscious dentistry ·

# VIDU

## STONE GYPSUM Type IV

es · Yeso piedra Tipo IV  
it · Gesso di pietra Tipo IV  
fr · Plâtre pierre Type IV  
pt · Gesso pedra Tipo IV  
de · Hartgips Typ IV

**"THE FUTURE  
IS IN YOUR HANDS"**

# VIDU

STONE GYPSUM Type IV

en

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### Description

Extra hard type 4 stone specific for master models with complete and partial prostheses, metal frameworks, antagonist and implant model prostheses.  
Color: pink.


#### Technical specifications

Setting time: 7 min. -  
Setting expansion: 0.08% -  
Compressive strength: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm<sup>2</sup>  
Rockwell hardness: 75 HRI.

#### Application



25 ml. + 100 g.

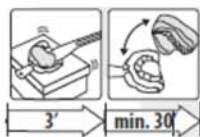

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all VIDU plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

#### Storage

Seal the container after use.

#### Minimum shelf life

3 years  
Do not use after the expiry date.

#### Packaging

REF VI56005 STONE GYPSUM Type IV - 6 Kg

# VIDU

YESO PIEDRA Tipo IV

es

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Descripción

Escayola tipo 4 extra dura específica para modelos maestros con prótesis completas y parciales, estructuras metálicas, prótesis antagonistas y modelo sobre implantes.  
Color: rosa.



#### Especificaciones técnicas

Tiempo de fraguado: 7 min. -  
Expansión de ajuste: 0,08% -  
Resistencia a la compresión: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm<sup>2</sup>  
Dureza Rockwell: 75 HRI.

#### Aplicación



25 ml. + 100 g.

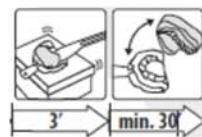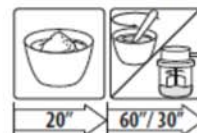

Mediciones realizadas con agua desionizada a 23 °C. Con "Time Out" (regulador del tiempo de trabajo para todos los yesos/escayolas VIDU) se puede aumentar el tiempo de vertido según la técnica preferida.

#### Almacenamiento

Selle el envase después de su uso.

#### Vida útil mínima

3 años  
No usar después de la fecha de caducidad.

#### Embalaje

REF VI56005 YESO PIEDRA Tipo IV - 6 Kg



ECO  
DESIGN



CLOSE  
MANUFACTURE



RESPONSIBLE  
CONSUMPTION



SMART  
WASTE



ONLINE  
DISTRIBUTION

LASCOD S.P.A.  
Via L. Longo 18, 50019 Sesto Fiorentina,  
Florence, Italy  
MADE IN ITALY

Dentared Odontology Services SL  
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,  
28108, Madrid, Spain  
www.vidu.eco

2022-REV-001



## MODE D'EMPLOI

**Description**

Plâtre extra-dur de type 4, spécifique pour les maîtres modèles avec prothèses complètes et partielles, armatures métalliques, prothèses antagonistes et modèles sur implants.

Couleur : rose.

**Spécifications techniques**

Temps de prise : 7 min. -

Expansion de l'ajustement : 0,08% -


Résistance à la compression : 70 MPa - 10.144 Psi - 713

Kg/cm<sup>2</sup>

Dureté Rockwell : 75 HRI.

**Application**

25 ml. + 100 g.

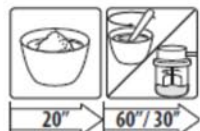

Mesures effectuées avec de l'eau déionisée à 23 °C. Avec "Time Out" (régulateur de temps de travail pour tous les gypses/plâtres VIDU), le temps de coulée peut être augmenté selon la technique préférée.

**Stockage**

Fermez le récipient après utilisation.

**Durée de vie minimale**

3 ans

Ne pas utiliser après la date de péremption.

**Emballage**

REF V156005 PIERRE DE GYPSE Type IV - 6 Kg

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Descrizione**

Gesso extra duro di tipo 4, specifico per modelli master con protesi complete e parziali, strutture metalliche, protesi antagoniste e modelli su impianti.

Colore: rosa.

**Specifiche tecniche**

Tempo di regolazione: 7 min.

Espansione della regolazione: 0,08% -

Resistenza alla compressione: 70 MPa - 10.144 Psi - 713

Kg/cm<sup>2</sup>

Durezza Rockwell: 75 HRI.

**Applicazione**

25 ml. + 100 g.



Misure effettuate con acqua deionizzata a 23 °C. Con "Time Out" (regolatore del tempo di lavoro per tutti gli intonaci VIDU) è possibile aumentare il tempo di colata in base alla tecnica preferita.

**Deposito**

Sigillare il contenitore dopo l'uso.

**Durata minima di vita**

3 anni

Non usare dopo la data di scadenza.

**Imballaggio**

REF V156005 GESSO DI PIETRA Tipo IV - 6 Kg

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Descrição**

Gesso tipo 4 extra duro, especificamente para modelos principais com próteses completas e parciais, estruturas metálicas, próteses antagonistas e modelos sobre implantes.

Cor: rosa.

**Especificações técnicas**

Tempo de definição: 7 min. -

Expansão do ajustamento: 0,08% -

Força compressiva: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm<sup>2</sup>

Dureza Rockwell: 75 HRI.

**Aplicação**

25 ml. + 100 g.



Medições feitas com água desionizada a 23 °C. Com "Time Out" (regulador de tempo de trabalho para todos os gessos VIDU) o tempo de despejo pode ser aumentado de acordo com a técnica preferida.

**Armazenamento**

Selar o recipiente após a sua utilização.

**Vida útil mínima**

3 anos

Não utilizar após a data de expiração.

**Embalagem**

REF V156005 GESSO PEDRA Tipo IV - 6 Kg